

**BIRTH  
ALARM**

*the original product*

# Birth Alarm Lite

**NL** Bedieningshandleiding



Hartelijk dank voor de aanschaf van de Birth Alarm Lite. Dit is een betrouwbaar meldsysteem voor veulengeboortes. Wij adviseren u voor ingebruikname deze handleiding zorgvuldig door te lezen, een goede montage en bediening zijn essentieel voor een juiste werking.

## Inhoudsopgave

1.	Inleiding	5
2.	Inhoud van de verpakking	5
3.	Klaarmaken voor gebruik	7
3.1	Eerste keer	7
3.2	In-/uitschakelen	8
4.	De lampjes van de Birth Alarm Lite	9
4.1	Het statuslampje	9
4.2	Het GSM-lampje	10
5.	De binnenkant van de Birth Alarm Lite	11
5.1	Batterijen plaatsen/vervangen	11
5.2	Behuizing van de Birth Alarm Lite	12
5.3	SIM-kaart plaatsen	12
6.	Nieuwe SIM-kaart installeren	13
7.	Telefoonnummers programmeren	15
7.1	Programmeermodus	15
7.2	Telefoonnummers programmeren	15
7.2.1	Programmeren met SMS	17
7.2.2	Direct programmeren	18
8.	Testen	20
9.	Montage bij de merrie	22
9.1	Montage onder het halster	23
9.2	Montage in een anti-rol singel	24
10.	Samenvatting en wijze van gebruik	25
11.	Technische gegevens	27

## 1. Inleiding

Wanneer uw merrie gaat bevallen wilt u graag aanwezig zijn zodat u bij eventuele complicaties kunt ingrijpen of een veearts kunt waarschuwen. Paarden en pony's hebben de eigenschap om tijdens hun bevalling geheel gestrekt op hun linker- of rechterzijde te gaan liggen. Zo hebben ze meer ruimte tijdens persweeën. De Birth Alarm Lite maakt handig gebruik van deze eigenschap. Door de Birth Alarm Lite eenvoudigweg onder het halster van uw merrie (of in een anti-rolsingel) te monteren, zal deze u waarschuwen wanneer de geboorte zich inzet.

## 2. Inhoud van de verpakking

1. **De Birth Alarm Lite geboortemelder.**
2. **De speciale houder.** Hier wordt de Birth Alarm Lite ingeschoven. Deze houder kan zowel onder het halster van uw merrie worden bevestigd of in de ring van de anti-rolsingel.
3. **Kabelbinders.** Om van start te kunnen gaan hebben we alvast een aantal kabelbinders (ook wel "tie-wraps" genoemd) bijgeleverd. Deze kabelbinders zijn voor eenmalig gebruik, maar ze zijn gewoon bij iedere Bouwmarkt verkrijgbaar.
4. **De speciale schroevendraaier.** Enerzijds kunt u hiermee uw Birth Alarm Lite openschroeven (bijvoorbeeld wanneer de batterijen vervangen moeten worden of wanneer u SIM-kaart er in/uit moet halen). Maar op de achterzijde van deze schroevendraaier bevindt zich tevens een sterke magneet. Hiermee kunt u de Birth Alarm Lite bedienen.
5. **SIM-kaart pakket.** Dit pakket bevat de benodigde servicenummers en tevens de PIN-code en PUK-code van de SIM-kaart. *(Het kan zijn dat uw Birth Alarm Lite is geleverd zonder SIM-kaart/SIM pakket. Dit is afhankelijk van het land waar u woont)*
6. **Documentatie.** U vindt bij uw Birth Alarm Lite tevens 2 soorten documentatie. Namelijk:

- a. **Beknopte handleiding** (korte beknopte handleiding)
- b. **Probleemoplossing** (Deze controlelijst kunt u gebruiken wanneer u problemen ondervind bij het gebruik van de Birth Alarm Lite)



## 3. Klaarmaken voor gebruik

### 3.1 Eerste keer

Wanneer u de Birth Alarm Lite voor de eerste keer wilt gaan gebruiken dient u deze stappen eenmalig uit te voeren:

- Schroef de Birth Alarm Lite open het verwijder het rode label welke tegen de pool van één van de batterijen zit. De batterijen maken nu contact met de Birth Alarm Lite.
- Afhankelijk van het land waar u woont is de SIM-kaart mogelijk al meegeleverd.
  - Is dit wel het geval, dan bevindt zich deze reeds in de SIM-houder onder het batterijcompartiment [\(zie 5.3\)](#)
  - Is dit niet het geval, dan dient u de simkaart zelf aan te schaffen en in te stellen als u dit gedaan heeft moet de simkaart worden geactiveerd en in de SIM-houder worden geschoven. [\(zie 5.3\)](#)
- In het hoofdstuk “Nieuwe Simkaart installeren” [\(zie 6\)](#) wordt uitgelegd hoe u een nieuw aangeschafte simkaart zelf kunt instellen en installeren.

Als u deze stappen bij uw nieuwe Birth Alarm Lite hebt uitgevoerd kunt u deze weer dicht schroeven en verder gaan met instellen.

**i** *Als u zelf goede ontvangst heeft met uw mobiele telefoon in de stal of weide waar uw merrie zich bevindt, bevelen wij u aan een SIM-kaart aan te schaffen van dezelfde provider.*

## 3.2 In-/uitschakelen

U kunt de Birth Alarm Lite in-/uitschakelen en bedienen met de achterzijde van de bijgeleverde speciale schroevendraaier.

Om de Birth Alarm Lite **IN** te schakelen gaat u als volgt te werk:



- Houd de achterzijde van de schroevendraaier tegen het rode blokje (■) bij het ⏻-symbool op de zijkant van de Birth Alarm Lite.
- U ziet dat het statuslampje groen oplicht. Nu haalt u de schroevendraaier weer weg.
- De Birth Alarm Lite is nu actief en klaar om op uw merrie geplaatst te worden.

Om de Birth Alarm Lite **UIT** te schakelen gaat u als volgt te werk:



- Houd de achterzijde van de schroevendraaier wederom tegen het rode blokje (■) bij het ⏻-symbool op de zijkant van de Birth Alarm Lite.
- U ziet dat het statuslampje nu rood oplicht. Nu haalt u de schroevendraaier weer weg.
- De Birth Alarm Lite is nu uitgeschakeld.

## 4. De lampjes van de Birth Alarm Lite

### 4.1 Het statuslampje



Het statuslampje is het buitenste lampje aan de zijkant van de Birth Alarm Lite. Het statuslampje is een speciaal lampje welke in 3 verschillende kleuren kan oplichten, namelijk blauw, groen en rood. Aan de knippervolgorde van het statuslampje kan men de status van de Birth Alarm Lite aflezen. Bijvoorbeeld: als het lampje groen flitst is de Birth Alarm Lite oké maar wanneer het statuslampje rood flitst moet de batterij vervangen worden.

Wanneer de Birth Alarm Lite gaat bellen kunt u ook het één en ander aan het statuslampje aflezen. Als het lampje afwisselend blauw en rood knippert, dan betekent dit dat het bereik slecht is. Ziet u het lampje afwisselend geel/blauw of groen/blauw knipperen dan is het bereik matig of goed. In de tabel hieronder kunt u aflezen wat de standaard lichtpatronen betekenen.

Fig1. : Standaard lichtpatronen van het statuslampje

Lichtpatroon LED	Betekenis
	Stand-by, batterij oké
	Stand-by, batterij zwak
	GSM actief, bezig met verbinden
	GSM actief, netwerkontvangst is slecht
	GSM actief, netwerkontvangst is matig
	GSM actief, netwerkontvangst is goed



## 4.2 Het GSM-lampje



Naast het statuslampje aan de zijkant van de Birth Alarm Lite vindt u ook nog een lampje met het bijschrift "GSM". Dit lampje licht alleen amberkleurig op. Dit lampje is direct gekoppeld met de interne GSM van de Birth Alarm Lite, en zal ook alleen op gaan lichten wanneer de interne GSM van de Birth Alarm Lite actief wordt.

Er zijn bij het GSM-lampje kortweg 3 situaties mogelijk:


1. De GSM zoekt netwerkverbinding (het lampje knippert snel)
2. De GSM heeft netwerkverbinding (het lampje knippert langzaam)
3. De GSM is aan het bellen (het lampje brand continu tijdens de oproep)

Het GSM-lampje dient alleen ter ondersteuning, u zult doorgaans vooral het statuslampje gebruiken.

## 5. De binnenkant van de Birth Alarm Lite

Wanneer u de Birth Alarm Lite openschroeft ziet u de volgende belangrijke onderdelen:

1. Batterijen
2. SIM-kaart / SIM-kaarthouder
3. Statuslampje
4. GSM lampje

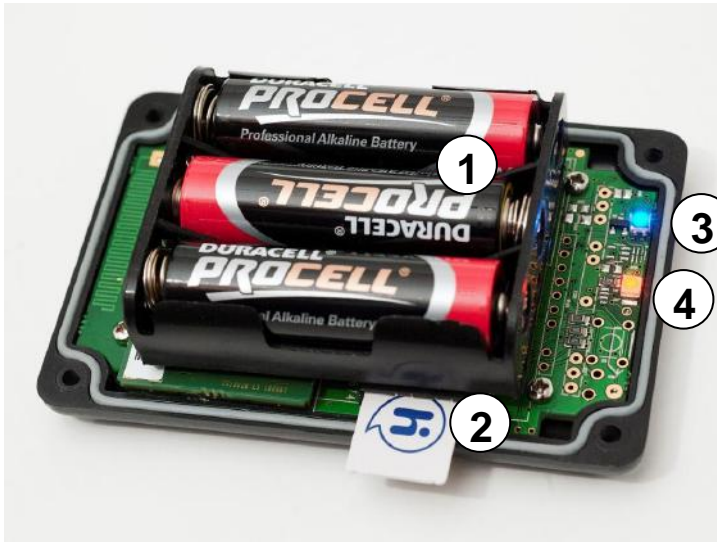

### 5.1 Batterijen plaatsen/vervangen

Wanneer u de batterijen vervangt van uw Birth Alarm Lite dient u altijd Alkaline batterijen te gebruiken (bij voorkeur “Duracell” of “Panasonic”). Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt afgeraden. Vervang een set batterijen ook altijd per 3 tegelijk! Wanneer het niet lukt om de batterijen er met uw vingers uit te halen kunt u ook voorzichtig een kleine schroevendraaier gebruiken.

De batterijen moeten telkens met de minpool van de batterij op het veertje geplaatst worden.

***i** Gebruik altijd nieuwe batterijen aan het begin van het veulenseizoen!*

***i** Wanneer u de Birth Alarm Lite gedurende langere tijd niet meer zult gebruiken, bijvoorbeeld na het veulenseizoen, kunt u het beste de batterijen eruit halen om te voorkomen dat deze gaan lekken en schade aanrichten in uw Birth Alarm Lite.*


## 5.2 Behuizing van de Birth Alarm Lite

De behuizing van de Birth Alarm Lite is zo ontworpen dat deze slechts op één manier dichtgeschroefd kan worden. Zo bent u er zeker van dat het statuslampje en het GSM-lampje zichtbaar zijn.

## 5.3 SIM-kaart plaatsen

De SIM-kaart dient met de chip naar onderen in de Birth Alarm Lite geschoven te worden. Let hierbij ook op de schuine kant van de SIM-kaart. Deze moet naar voren wijzen als u de SIM-kaart plaatst.

Duw de SIM-kaart in de houder totdat u een “klik” hoort. Laat dan de SIM-kaart weer los. De SIM-kaart zit nu in de houder en de Birth Alarm Lite is klaar voor gebruik. Wanneer u de SIM-kaart weer uit de houder wilt halen, duwt u voorzichtig tegen de SIM-kaart totdat u wederom een “klik” hoort. Als u nu de SIM-kaart weer loslaat zal de SIM-kaart naar voren komen zodat u deze er makkelijk uit kunt halen.

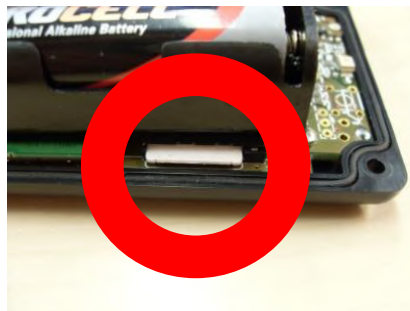

## 6. Nieuwe SIM-kaart installeren

Afhankelijk van het land waar u woont is de SIM-kaart mogelijk al meegeleverd bij de Birth Alarm Lite. Is dit het geval dan bevindt deze SIM-kaart zich reeds in de SIM-kaarthouder. Is dit niet het geval, dan dient u zelf een SIM-kaart aan te schaffen.

Koop een prepaid SIM-kaart (of eventueel een SIM-kaart met een goedkoop SIM-only abonnement) bij uw mobiel speciaalzaak. Kies bij voorkeur voor een provider waarvan u weet dat deze een goede dekking biedt op de plek waar u de Birth Alarm Lite wilt gaan gebruiken.

Wanneer u een SIM-kaart heeft aangeschaft dient u deze nog te activeren. Dit gaat als volgt:

- Steek de nieuw aangeschafte SIM-kaart in uw eigen toestel.
- Indien uw toestel na het inschakelen om een pincode vraagt, voert u deze in. De pincode staat vermeld in het boekje of op de brief die bij uw SIM-kaart geleverd is. Overigens is de pincode in de meeste gevallen "0000".
- Probeer nu met het toestel ergens naartoe te bellen. Mogelijk hoort u voordat de telefoon overgaat een soort welkomstboodschap van uw provider omdat u zich nu voor de allereerste keer aanmeldt. Luister deze hele boodschap af.
- Nu dient u te controleren of de voicemail van de SIM-kaart is uitgeschakeld. Dit doet u door met een ander toestel naar het nummer van de SIM-kaart te bellen. Indien u na enige tijd wordt doorverbonden met een voicemails-service is de voicemail van de SIM-kaart dus ingeschakeld. In dit geval moet u zelf de voicemail uitschakelen door te bellen met de klantenservice van de provider of door het intoetsen van een bepaalde uitschakelcode. Hoe het uitschakelen van de voicemail in zijn werk gaat is per provider verschillend en staat vermeld in de handleiding van uw SIM-kaart.



- Wanneer u bij het inschakelen van het toestel wordt gevraagd om een pincode moet deze pincode beveiliging uitgeschakeld worden. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw toestel.
- Controleer wat het beltegoed van de SIM-kaart is. Dit doet u door naar de beltegoed/opwaardeerservicelijn van uw provider te bellen. Zorg ervoor dat er minimaal € 10,- op de kaart staat. Indien het beltegoed onvoldoende is dient u dit op te waarden via een beltegoedkaart (verkrijgbaar bij postkantoor of supermarkt).



Wanneer u alle stappen hebt uitgevoerd is de nieuwe SIM-kaart klaar voor gebruik en kunt u deze in de Birth Alarm Lite installeren. [\(zie 5.3\)](#)


## 7. Telefoonnummers programmeren

Om instellingen op uw Birth Alarm Lite te kunnen wijzigen dient u het apparaat in programmeermodus te zetten.

### 7.1 Programmeermodus

Om de Birth Alarm Lite direct te kunnen programmeren gaat u als volgt te werk:

- Houd de achterzijde van de schroevendraaier **gedurende enkele seconden** tegen het rode blokje (  ) bij het  -symbool op de zijkant van het kastje
- Terwijl u dit doet zal het statuslampje eerst 3x groen oplichten en daarna blauw.
- Wanneer het statuslampje blauw oplicht kunt u de schroevendraaier weghalen.
- De Birth Alarm Lite staat nu in programmeermodus.

 *Wanneer u klaar bent met programmeren wacht u 2-3 minuten, de Birth Alarm Lite zal vanzelf de programmeermodus weer verlaten, en terug gaan naar normale toestand. De Birth Alarm Lite staat dan gewoon aan en is weer klaar voor gebruik.*

### 7.2 Telefoonnummers programmeren

- Zet de Birth Alarm Lite in “programmeermodus” ([zie 7.1](#)) . Wacht totdat het statuslampje afwisselend 1x blauw- 1x groen knippert.
- Nu belt u met uw (bij voorkeur mobiele) telefoon naar de Birth Alarm Lite.
- De Birth Alarm Lite zal nu uw oproep ontvangen en uw telefoonnummer in zijn geheugen programmeren.



- Ter bevestiging zal de Birth Alarm Lite u nu ook terugbellen. U laat uw telefoon gewoon overgaan (dus niet opnemen en ook niet wegdrücken).

***i** Nu bent u in feite al klaar met programmeren. De Birth Alarm Lite kent nu uw nummer en zal u bellen bij de bevalling. U dient nu 2-3 minuten wachten. De Birth Alarm Lite zal automatisch de programmeermodus weer verlaten. De Birth Alarm Lite is dan klaar voor gebruik.*

Mocht u nog een tweede nummer willen voorprogrammeren dan kunt de stappen hieronder volgen.

- Wacht totdat de Birth Alarm Lite 1x blauw **2x** groen knippert.
- Nu belt u met het toestel naar de Birth Alarm Lite waarop u als **2<sup>e</sup>** gebeld wilt worden (dit mag ook een vaste telefoon aansluiting zijn).
- De Birth Alarm Lite zal ook deze oproep ontvangen en uw telefoonnummer in zijn geheugen programmeren.
- Ter bevestiging zal de Birth Alarm Lite u ook op dit toestel terugbellen. Laat uw telefoon gewoon overgaan en reageer hier niet op.

*Fig2. : Lichtpatronen van het statuslampje bij programmeren*

Lichtpatroon LED	Betekenis
	De Birth Alarm Lite is klaar voor de eerste oproep
	De Birth Alarm Lite is klaar voor de tweede oproep

**i** U kunt aan het aantal groene flitsen van de Birth Alarm Lite zien welk nummer u kunt programmeren. Zo betekent 1x blauw en 2x groen bijvoorbeeld dat u het 2<sup>e</sup> nummer programmeert

### 7.2.1 Programmeren met SMS

U kunt de Birth Alarm Lite ook programmeren via een SMS. U gaat hiervoor als volgt te werk:

- Stel op uw eigen mobiele telefoon een SMS-bericht met de tekst: “**M1:**” (Let op! hoofdletter **M** gebruiken) direct gevolgd door het gewenste eerste nummer. In de tabel hieronder ziet u een voorbeeld van een SMS in uw land.

Land	Land-code	Voorbeeld van uw mobiele nummer :	Voorbeeld van de op te stellen SMS: (Let op! Hoofdletter “M” gebruiken en alles aan elkaar typen zonder spaties)
Nederland (NL)	+31	0 6 12345678	<b>M1:+31612345678</b>
België (BE)	+32	0 491 123456	<b>M1:+32491123456</b>
Frankrijk (FR)	+33	0 6 12345678	<b>M1:+33612345678</b>
Zwitserland (CH)	+41	0 176 12345678	<b>M1:+4117612345678</b>
Oostenrijk (AT)	+43	0 664 1234567	<b>M1:+436641234567</b>
Engeland (UK)	+44	0 7788 123456	<b>M1:+447788123456</b>
Zweden (SE)	+46	0 707 123456	<b>M1:+46707123456</b>
Duitsland (DE)	+49	0 171 1234567	<b>M1:+491711234567</b>

**i** Zoals u in de tabel kunt zien programmeert u dus de landcode eigenlijk in plaats van de allereerste “0” die u normaal gewend bent te draaien wanneer u een mobiel nummer belt.



- Zet de Birth Alarm Lite in “programmeermodus” (zie 7.1) . Wacht totdat het statuslampje afwisselend 1x blauw- 1x groen knippert.
- Stuur nu de SMS die u zojuist heeft opgesteld naar het mobiele nummer van de Birth Alarm Lite.
- Na korte tijd ontvangt u ter bevestiging een antwoord-SMS van de Birth Alarm Lite. Hierin staat het nummer dat u heeft geprogrammeerd achter M1:

Uiteraard kunt u op dezelfde wijze ook M2 programmeren. U kunt ook gerust beide nummers tegelijkertijd in één SMS programmeren, maar begin dan wel voor elk nummer een nieuwe regel in uw SMS-bericht.



**i** *Het is sterk aan te bevelen om als eerste nummer (M1) een mobiel nummer te programmeren. Zo kan de Birth Alarm Lite u SMS-berichten sturen en SMS-berichten van u ontvangen.*

**i** *U kunt de nummers ook via SMS programmeren terwijl u de geboortemelder test. (zie 8) In de periode dat het GSM lampje op de Birth Alarm Lite rustig knippert, kunt u een SMS met telefoonnummer(s) of nieuwe instellingen sturen, en kan de Birth Alarm Lite deze verwerken.*

## 7.2.2 Direct programmeren

Er is te allen tijde een mogelijkheid om de Birth Alarm Lite te programmeren door de SIM-kaart van de Birth Alarm Lite tijdelijk in uw eigen of een andere mobiele telefoon te doen, en de nummers via deze telefoon op de SIM-kaart te programmeren. Dit is doorgaans wel de meest complexe manier. Om de SIM-kaart direct te programmeren gaat u als volgt te werk:

- Haal de SIM-kaart uit de SIM-kaarthouder van de Birth Alarm Lite. [\(zie 5.3\)](#)
- Stop de SIM-kaart nu in een andere mobiele telefoon.
- Schakel de mobiele telefoon in.
- Programmeer nu de namen M1, M2 **op de SIM-kaart**, op de geheugenplekken 11 en 12. Hoe dit in z'n werk gaat kunt u vinden in de handleiding van de mobiele telefoon. Let op dat u de nummers niet per ongeluk op het vaste geheugen van de telefoon programmeert.
- Programmeer alle nummers op de SIM-kaart (ook wanneer u bijvoorbeeld maar 2 nummers wilt gebruiken). Wanneer u wilt dat één van de geheugens niet gebeld wordt dan programmeert u als telefoonnummer: "+1111".



## 8. Testen

Voordat u de Birth Alarm Lite gaat gebruiken is het belangrijk om deze eerst te testen zodat u zeker bent van een juiste werking. Het testen kunt u eenvoudig zelf doen.



- Ga met de Birth Alarm Lite bij voorkeur naar de plek waar uw merrie zich bevindt.
- Neem de Birth Alarm Lite in uw handen en schakel deze in zodat het statuslampje eens per 8 seconden groen opflitst.
- Draai nu de Birth Alarm Lite 90 graden zodat het statuslampje naar boven gericht is.
- Het statuslampje zal nu sneller en oranje gaan flitsen.
- Na enkele seconden word het statuslampje blauw en zal ook de GSM-led oplichten.
- Binnen korte tijd zal de Birth Alarm Lite nu gaan bellen naar het nummer dat onder “M1” geprogrammeerd is.
- U neemt de oproep niet op en weigert deze ook niet via de rode knop. U laat de telefoon gewoon overgaan.
- De Birth Alarm Lite stopt na enkele seconden vanzelf met bellen.
- Nu kunt u de Birth Alarm Lite stoppen door er eenvoudigweg naartoe te bellen. De Birth Alarm Lite zal uw oproep aannemen en u zult 3 toontjes horen als teken dat u de Birth Alarm Lite heeft stopgezet. De Birth Alarm Lite zal vervolgens geen verdere nummers bellen totdat deze na enkele minuten opnieuw 90° wordt gekanteld.

Als de test goed is verlopen kunt u de Birth Alarm Lite bij uw merrie aanbrengen.

Wanneer u toch problemen ondervindt, kunt u de bijgeleverde probleemoplosser gebruiken.

***i** U kunt het mobiele nummer van de Birth Alarm Lite in uw eigen mobiele telefoon programmeren met als naam “Merrie” of “Geboorte”. U zult dan vooraf in het scherm van uw mobiele telefoon al kunnen zien wanneer de Birth Alarm Lite u opbelt.*

***i** Wanneer u door de Birth Alarm Lite gebeld wordt, (of het nu een geboortemelding is of tijdens programmeren), neem een oproep van de Birth Alarm Lite nooit op. Wanneer u namelijk opneemt voert u in principe “een gesprek” met de Birth Alarm Lite en dat kost onnodig beltegoed! Druk een oproep ook niet weg (rode knop indrukken), want dan kan het zijn dat de Birth Alarm Lite wordt doorverbonden naar uw voicemail.*

## 9. Montage bij de merrie

Om de Birth Alarm Lite in een singel of onder het halster te kunnen gebruiken moet deze in de bijgeleverde houder bevestigd worden, dit gaat als volgt:

- Schuif de Birth Alarm Lite voorzichtig in de houder zoals op de onderstaande foto.
- Zorg dat de beide lampjes aan de zijkant zichtbaar zijn.
- Maak daarna de flap dicht met de bijgeleverde sluitclip.



## 9.1 Montage onder het halster

Indien u de Birth Alarm Lite onder een halster wilt gebruiken, monteer hem dan zoals hieronder is voorgeschreven middels 3 tie-wraps.



## 9.2 Montage in een anti-rolsingel

Wanneer u de Birth Alarm Lite in een anti-rolsingel gebruikt, dient u de houder met de Birth Alarm Lite te monteren conform de afbeelding hieronder. U gebruikt voor het vastzetten in een anti-rolsingel 6 tie-wraps.



## 10. Samenvatting en wijze van gebruik

*Hieronder wordt kort omschreven hoe de Birth Alarm Lite werkt en hoe deze gebruikt moet worden. Wij raden u aan deze tekst te lezen.*

De Birth Alarm Lite controleert eens per 8 seconden de houding van uw merrie. In de tussenpozen zal de Birth Alarm Lite overschakelen naar een energiezuinige toestand zodat de batterij niet wordt belast. Wanneer uw merrie weeën krijgt en daardoor gestrekt gaat liggen zal de Birth Alarm Lite uw eigen mobiele telefoon opbellen. U ziet dan op het scherm van uw mobiele telefoon het telefoonnummer van de Birth Alarm Lite verschijnen. Als u dit nummer in de telefoonlijst van uw mobiele telefoon opslaat met bijvoorbeeld de naam “BirthAlarm” of “Merrie”, verschijnt deze naam tevens in het scherm van uw telefoon. Nu weet u dus dat de Birth Alarm Lite u belt. In tegenstelling tot wat u normaal zou doen, neemt u in dit geval **niet** op! Hierdoor voert u geen “gesprek” en zal de melding naar u toe geheel kosteloos zijn. Na enkele seconden stopt de Birth Alarm Lite zelf met bellen. Daarna kunt u de Birth Alarm Lite terugbellen (ook dit is kosteloos) Hiermee laat u de Birth Alarm Lite weten dat u zijn oproep heeft gehoord en zal de Birth Alarm Lite stoppen met bellen. De Birth Alarm Lite wordt pas weer actief als het paard opnieuw gaat liggen.

Wanneer u de Birth Alarm Lite niet binnen ruim een minuut terugbelt, zal de Birth Alarm Lite het tweede nummer in zijn geheugen bellen (indien er een tweede nummer is geprogrammeerd) en daarna wederom ruim een minuut wachten op bevestiging. Als de Birth Alarm Lite beide nummers een keer heeft gebeld zonder dat één van de nummers heeft gereageerd zal de Birth Alarm Lite opnieuw het eerste nummer bellen en daarna nog een keer het 2<sup>e</sup> nummer. Daarna stopt de Birth Alarm Lite vanzelf met bellen.

Overigens dient te worden opgemerkt dat de Birth Alarm Lite ook probleemloos naar een vaste aansluiting (uw telefoon thuis) kan bellen. Indien uw vaste toestel is voorzien van nummerherkenning kunt u ook van





tevoreen vaststellen of de Birth Alarm Lite u belt. Wanneer uw vaste telefoontoestel geen nummerherkenning heeft bent u bij iedere oproep genoodzaakt gewoon op te nemen. U hoort dan een pieptoon waaraan u de Birth Alarm Lite kunt herkennen. In dit geval heeft u wel een gespreksverbinding met de Birth Alarm Lite en zal er een klein bedrag op de prepaid kaart van de Birth Alarm Lite in mindering worden gebracht. Indien u de Birth Alarm Lite op deze manier wilt gebruiken adviseren we u regelmatig het beltegoed te controleren. Zorg ervoor dat dit altijd boven de € 10,- blijft.

Op een set alkaline batterijen kan het systeem doorgaans minimaal een maand werken. Het gebruik van oplaadbare of de goedkopere zink-kool batterijen wordt sterk afgeraden!

## 11. Technische gegevens

Voedingsspanning	4,5V (3xAA Alkaline)
Stroomverbruik	130uA gemiddeld (1,3A piek)
GSM Module	Dualband GSM-900/1800 MHZ
Geheugens	2
Slaapstand	Nee
Detectiehoek	Instelbaar 65..80°
Meldingstypen	Bellen / SMS

**Garantie:** Tot 2 jaar na aankoopdatum. Geldt niet bij breuk, waterschade en/of andere beschadigingen. De fabrikant en importeur zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de Birth Alarm Lite. Levering en werkzaamheden geschieden volgens de algemene voorwaarden van Gallagher Europe B.V.

<p>Gallagher Europe B.V. (NL)          Bornholmstraat 62A          9723 AZ GRONINGEN          Tel. 0031 (0)50 368 31 00 / Fax 0031 (0)50 306 16 55          E-mail: <a href="mailto:info.nl@gallaghereurope.com">info.nl@gallaghereurope.com</a></p>	
<p>Gallagher Belgium b.v.b.a. (BE)          Oude Baan 14          3945 HAM          Tel. 013/66 77 66 / Fax 013/ 66 80 21          E-mail: <a href="mailto:info.be@gallaghereurope.com">info.be@gallaghereurope.com</a></p>	
<p>Gallagher Europe (DE)          Talstrasse 7          49479 Ibbenbüren          Telefon: 05451/9444-0 / Fax: 05451/9444-33          E-mail: <a href="mailto:info.de@gallaghereurope.com">info.de@gallaghereurope.com</a></p>	

<p>Gallagher Europe (FR) Miniparc du Verger Bâtiment C - 1 rue de Terre Neuve 91940 LES ULIS Tél. 0820 203 700 / Fax 0820 203 701 E-mail: <a href="mailto:info.fr@gallaghereurope.com">info.fr@gallaghereurope.com</a></p>	
<p>Gallagher Europe (AT) Hopfgarten 18 8741 Weisskirchen Tel. +43 (0)3577/82200 / Fax. +43 (0)3577/80921 E-mail: <a href="mailto:info.at@gallaghereurope.com">info.at@gallaghereurope.com</a></p>	
<p>Gallagher Schweiz AG (CH) Zürcherstrasse 499 9015 St. Gallen Tel. 071 / 313 29 50 / Fax. 071 / 313 29 60 E-mail: <a href="mailto:info@gallagherschweiz.ch">info@gallagherschweiz.ch</a></p>	
<p>Gallagher Powerfence UK Ltd. Curriers Close, Canley COVENTRY CV4 8AW Tel. 0844 8500101 / Fax 0844 8501545 E-mail: <a href="mailto:info.uk@gallaghereurope.com">info.uk@gallaghereurope.com</a></p>	
<p>Gallagher Sweden AB (SE) Rönnaviksgatan 13 213 74 MALMÖ Tel. 040-41 88 80 / Fax 040-41 88 88 E-post: <a href="mailto:info@gallagher.se">info@gallagher.se</a></p>	



Gallagher Europe B.V.  
Bornholmstraat 62A  
9723 AZ Groningen

See for local addresses:

[www.birthalarm.com](http://www.birthalarm.com)