



Tak fordi du har købt **Birth Alarm Premium Plus App med app-support**. Dette er et yderst pålideligt alarmsystem til føling. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning grundigt, inden du tager det i brug, da korrekt montering og betjening er afgørende for en korrekt funktion.

Indhold

1. Indledning	3
2. Pakkens indhold	4
3. Forberedelse til brug	5
3.1 Første gang.....	5
3.2 Tænde/slukke	6
4 Indersiden af Birth Alarm Premium Plus App	7
4.1 Isætte/udskifte batterier	7
4.2 Kabinettet på Birth Alarm Premium Plus App.....	8
4.3 Isætte SIM-kortet.....	9
5 Lamperne (LEDs) på Birth Alarm Premium Plus App	10
5.1 Statuslamperne.....	10
5.2 LTE-lampe.....	11
6 Birth Alarm-appen	12
6.1 Birth Alarm downloade	12
6.2 Opret din konto	13
6.3 Registrer din Birth Alarm	14
6.4 Del din Birth Alarm.....	15
6.5 Deltag i en Birth Alarm	16
6.6 Se logbogen	17
6.7 Angiv sprog.....	18
6.8 Ændre indstillinger	19
6.9 Nulstil adgangskode	20
7. Test	21
8 Montering på hoppen	22
8.1 Montering under grimen.....	23
8.2 Montering i antirullegjorden	23
9 Resumé og brugsanvisning	24
10 Tekniske data	25

1. Indledning

Når din hoppe skal føle, ønsker du at være til stede, så du kan gribe ind ved eventuelle komplikationer eller tilkalde en dyrlæge.

Heste og ponyer har den naturlige egenskab at lægge sig udstrakt på venstre eller højre side under følingen. Derved får de mere plads under veerne. Birth Alarm Premium Plus App reagerer på dette.

Ved blot at montere Birth Alarm Premium Plus App i en antirullegjord (eller under **grimen** på din hoppe) vil enheden advare dig, når følingen begynder.

2. Pakkens indhold

1. **Birth Alarm Premium Plus App følingsdetektor.**
2. **Den specielle holder** (Birth Alarm Premium Plus App skydes ind her.) Holderen kan fastgøres enten under hoppens grime eller i ringen på antirullegjord.
3. **Den specielle skruetrækker.** På den ene side kan du bruge den til at åbne din Birth Alarm Premium Plus App (f.eks. når batterierne skal udskiftes, eller når du skal isætte/tage SIM-kortet ud). På bagsiden af denne skruetrækker findes der også en stærk magnet. Med den kan du betjene Birth Alarm Premium Plus App.
4. **Kabelbindere.** For at hjælpe dig i gang har vi allerede vedlagt et antal kabelbindere (også kaldet "strips"). Disse kabelbindere er til engangsbrug, men kan fås i ethvert byggemarked.
5. **USB-kabel.** Dette (eller et lignende) kabel er nødvendigt for at opdatere softwaren.




3. Forberedelse til brug

3.1 Første gang

Når du skal bruge Birth Alarm Premium Plus App for første gang, skal du udføre disse trin én enkelt gang:

- Skru Birth Alarm Premium Plus App op, og fjern etiketten, der sidder mod polen på et af batterierne. Batterierne er nu i kontakt med Birth Alarm Premium Plus App.
- Når du har gjort dette på din Birth Alarm Premium Plus App, kan du skru den sammen igen og fortsætte med opsætningen. Sørg ved samskruingen for, at lyslederne placeres over statuslamperne (*se 4.2*)

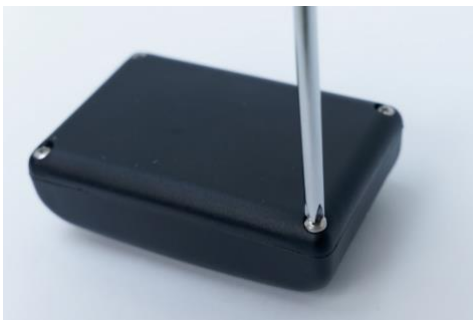

Skru op



Fjern etiketten



3.2 Tænde/slukke

Du kan tænde/slukke og betjene Birth Alarm Premium Plus App med bagsiden af den medfølgende specielle skruetrækker. På en af enhedens lange sider finder du 2 statuslamper.

For at **TÆNDE** for Birth Alarm Premium Plus App, gør følgende:

- Hold bagsiden af den specielle skruetrækker mod en af statuslamperne. (det er ligegyldigt hvilken af de to)
- Birth Alarm Premium Plus App tænder nu. Du genkender tændingen på, at begge statuslamper lyser grønt, derefter blinker blå et par gange og derefter lyser grønt igen.
- Når begge statuslamper har lyst op, kan du **fjerne skruetrækkeren igen**.
- Din Birth Alarm Premium Plus App er nu tændt. Statuslamperne blinker kort grønt hvert ~5. sekund for at indikere, at Birth Alarm Premium Plus App er tændt, og at alt fungerer korrekt.



For at **SLUKKE** for Birth Alarm Premium Plus App, gør følgende:


- Hold igen bagsiden af den specielle skruetrækker mod en af statuslamperne. (det er ligegyldigt hvilken af de to)
- Efter et kort øjeblik lyser lamperne rødt, hvorefter Birth Alarm Premium Plus App slukker sig selv.



4 Indersiden af Birth Alarm Premium Plus App

Nedenfor ser du en oversigt over de systemkomponenter, du har brug for til at betjene og bruge systemet.

1. Batterier
2. De 2 statuslamper
3. SIM-kortholder
4. USB-stik
5. LTE-status-LEDs
 - 5.1 "NET" – LED
 - 5.2 "RING" – LED
 - 5.3 "LTE" – LED

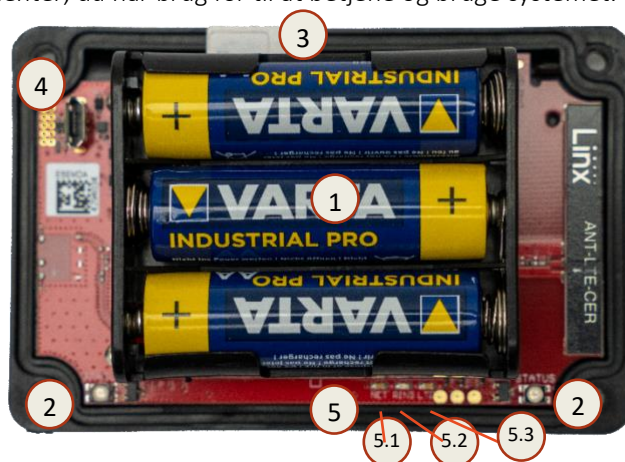

4.1 Isætte/udskifte batterier

Når du skifter batterier i din Birth Alarm Premium Plus App, skal du altid bruge alkalibatterier (helst "Duracell", "Panasonic" eller "Varta"). Brug af genopladelige batterier frarådes. Skift altid et sæt batterier ad gangen (3 stk.). Hvis det ikke lykkes at tage batterierne ud med fingrene, kan du forsigtigt bruge en lille skruetrækker.


Batterierne skal altid placeres med minuspolen mod fjederen.



- Brug altid nye batterier ved begyndelsen af følingsæsonen!
- Når du ikke længere skal bruge Birth Alarm Premium Plus App i en længere periode, f.eks. efter følingsæsonen, skal du tage batterierne ud for at forhindre, at de lækker og beskadiger din Birth Alarm Premium Plus App.

4.2 Kabinettet på Birth Alarm Premium Plus App

Kabinettet på Birth Alarm Premium Plus App kan kun skrues sammen på én måde. Lyslederne på lågets lange side skal ligge oven på statuslamperne, når du skruer det sammen.

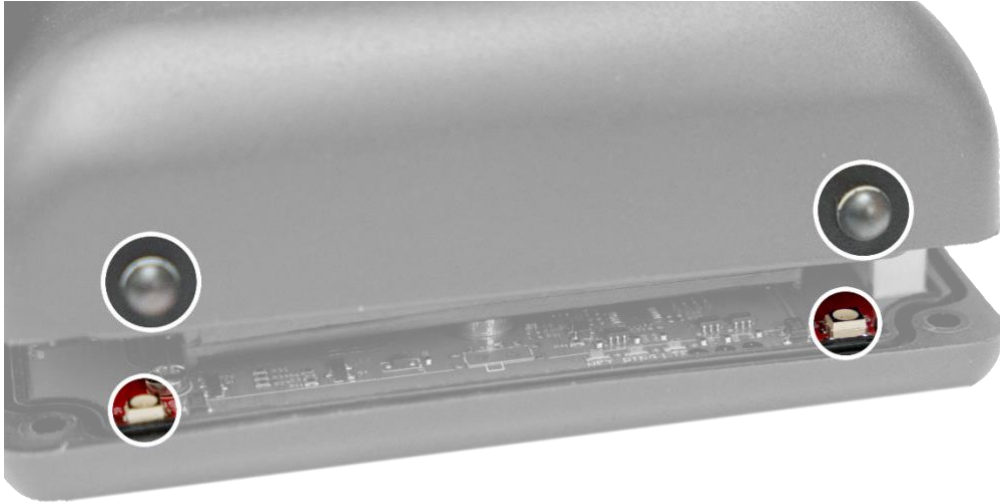


4.3 SIM-kort

Din Birth Alarm Premium Plus App fungerer med et **Nano-SIM**. Moderne SIM-kort leveres i en brudramme, hvorfra du kan trykke nano-SIM-formatet ud. Bemærk, at Nano-SIM-formatet er det mindste format. (12,3 x 8,8 mm).



Det medfølgende SIM-kort er allerede isæt og testet. Du behøver ikke gøre mere ved det!

Hvis du af en eller anden grund ønsker at bruge dit eget SIM-kort, er det muligt. Din Birth Alarm Premium Plus App fungerer så i praksis som en almindelig Birth Alarm Premium uden app-funktion. Vi anbefaler, at du i så fald læser vejledningen til Birth Alarm Premium.

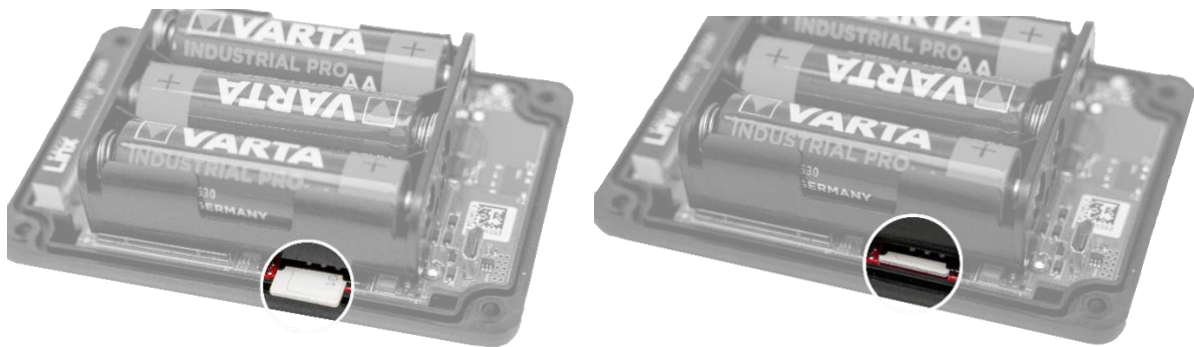

5 Lamperne (LEDs) på Birth Alarm Premium Plus App

For at kunne se status på din Birth Alarm Premium Plus App er der 2 statuslamper på ydersiden af enheden samt 3 små lamper på indersiden, der udelukkende vedrører det interne LTE-modul.

5.1 Statuslamperne

Statuslamperne sidder på enhedens lange side. Begge lamper opfører sig nøjagtigt ens. Den dobbelte udformning er udelukkende beregnet til altid at kunne aflæse statusen fra både venstre og højre side af din hoppe.



I nedenstående tabel finder du de mulige farvemønstre, som Birth Alarm Premium Plus App kan vise.

Farve / mønster	Betydning
● ●	● Standby, batteri OK
●● ●●	●● Standby, batteri OK, hviletilstand aktiveret
● ●	● Standby, batteri svagt
● ●	● LTE/GSM aktiv, forbinder
●● ●●	●● LTE/GSM aktiv, netværksmodtagelse utilstrækkelig
●● ●●	●● LTE/GSM aktiv, netværksmodtagelse moderat
●● ●●	●● LTE/GSM aktiv, netværksmodtagelse god



5.2 LTE-lamperne

LTE-lamperne er kun synlige, når du skruer Birth Alarm Premium Plus App op. Normalt behøver du ikke aflæse disse lamper, men det kan være nyttigt, hvis du oplever problemer med mobilforbindelsen og kontakter kundeservice.



I nedenstående tabel finder du de mulige blinkmønstre og deres betydning:

Navn	Mønster	Betydning
NET		Modulet søger netværksforbindelse
NET		Modulet er forbundet med netværket
NET		Modulet ringer
RING		Modulet modtager et opkald
LTE		Modulet er tændt

6 Birth Alarm-appen

Birth Alarm-appen støtter dig i følingssæsonen ved løbende at overvåge dine Birth Alarm Premium Plus App-enheder og straks advare dig, når følingen begynder.

Kort sagt tilbyder Birth Alarm-appen:

- Realtidsoverblik over status, aktivitet, batteri og forbindelse for dine enheder
- Øjeblikkelige alarmmeddelelser ved følingens begyndelse (via et internetopkald)
- Mulighed for at justere navn, foto og indstillinger pr. enhed
- Overblik og styring af flere enheder i én app
- Nem deling af adgang med andre brugere (f.eks. familie, venner eller stalteam)

6.1 Download Birth Alarm-appen

For at modtage meddelelser fra din Birth Alarm Premium Plus App på din telefon skal du bruge vores app "Birth Alarm".


Den er tilgængelig i **App Store** til iOS og i **Google Play Store** til Android.

Du kan også nemt downloade appen ved at scanne QR-koden nedenfor:




6.2 Opret din konto

1 2

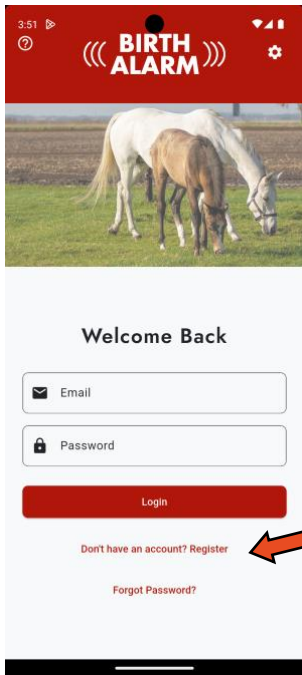


Når du starter Birth Alarm-appen, ser du dette skærbillede.

Tryk på '**Ingen konto endnu? Registrer**' for at oprette en ny konto.

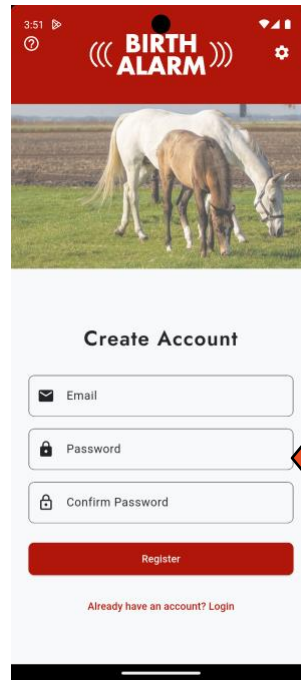

Indtast din e-mailadresse og den ønskede adgangskode.

3

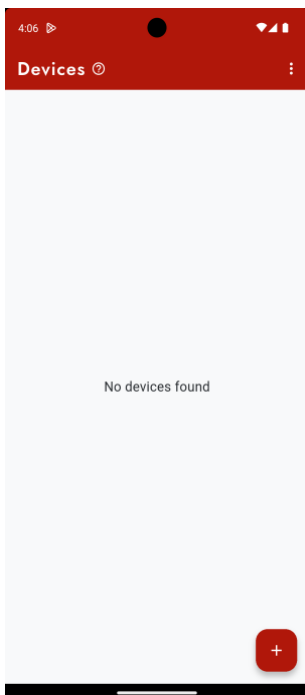


Efter registreringen ser du en tom enhedsliste.

Du er nu klar til at tilføje en ny enhed.

6.3 Registrer din Birth Alarm

1 2

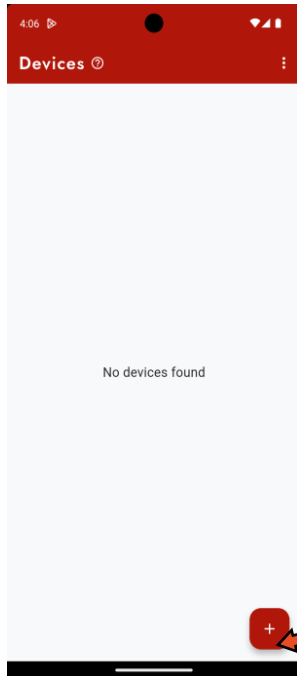


Tryk på +-knappen for at registrere en ny enhed.



Tryk på 'Registrer ny enhed'.


3 4

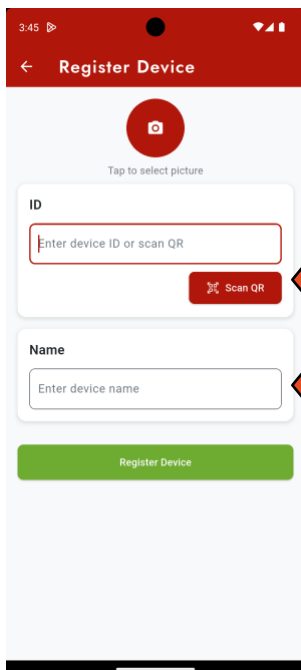

Tryk på 'Scan QR' for at åbne dit kamera. Scan QR-koden, der sidder i produktkassen.

Du kan indtaste et passende enhedsnavn, f.eks. navnet på din hoppe.

Klar? Tryk derefter på 'Registrer enhed'.

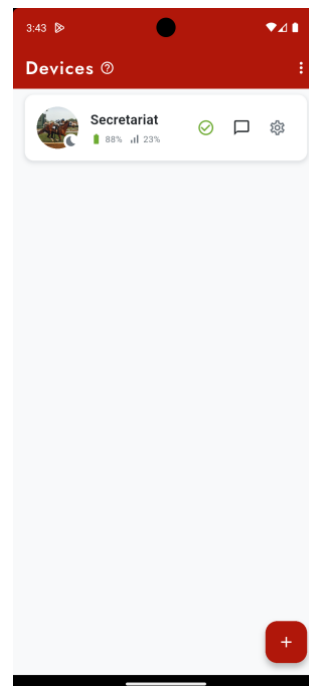


Din hoppers Birth Alarm er nu tilknyttet din konto.

Du kan nu se status, batteri og signal i enhedslisten.

6.4 Inviter nogen til at bruge din Birth Alarm sammen


Giv en anden bruger adgang til meddelelser fra din Birth Alarm, så I kan modtage meddelelser sammen og overvåge følingen.

1 2

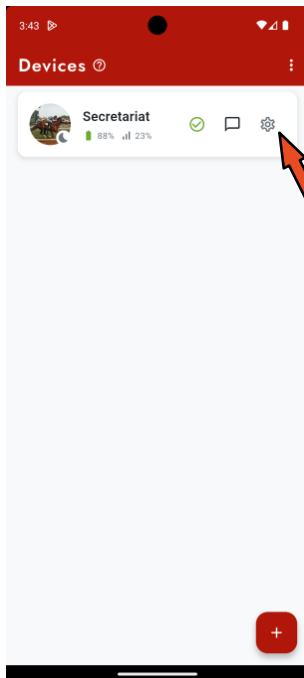


Med Birth Alarm-appen kan du dele din Birth Alarm med en anden bruger.

Begynd med at trykke på indstillingsknappen for den Birth Alarm, du vil dele.

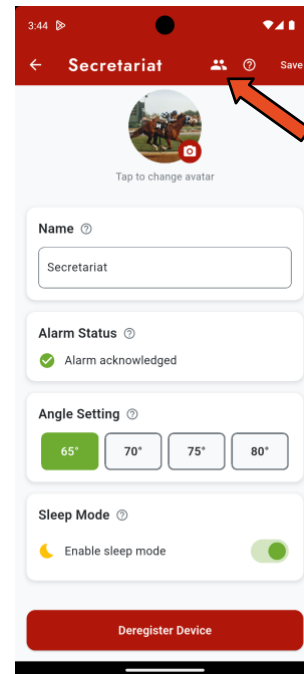

Tryk på ikonet 'Brugere'


3 4

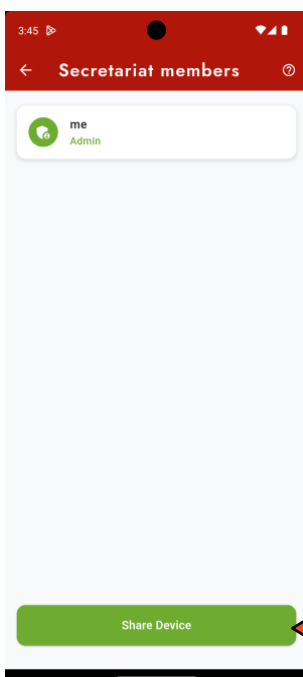

Du ser en liste med medlemmer.

Tryk på '**Del enhed**' for at vise en anden QR-koden eller sende et link.

Denne er nødvendig for at tilføje enheden.

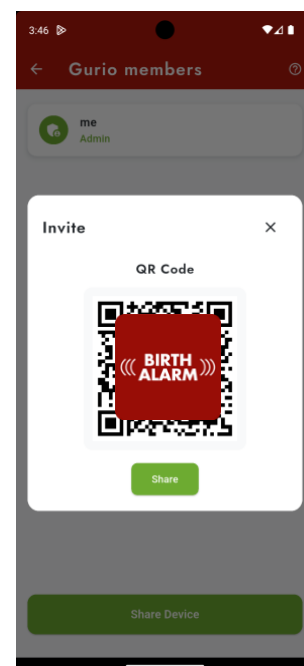


Lad den inviterede person scanne QR-koden i Birth Alarm-appen (se trin 6.5) eller følge det delte link.

Enheden vil derefter vises i deres Birth Alarm-app.

6.5 Accepter Birth Alarm-invitation

Accepter invitationen fra administratoren for at modtage meddelelser fra en Birth Alarm.

1 2

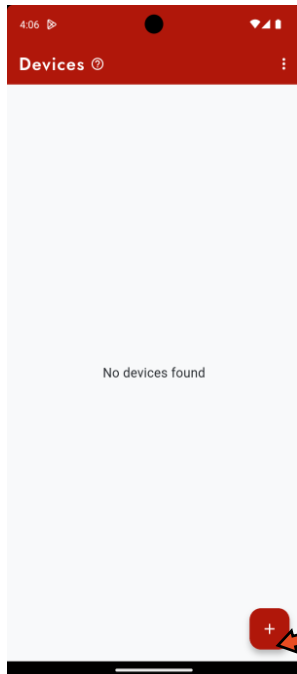


Med Birth Alarm-appen kan du tilføje Birth Alarms fra andre brugere.

Tryk på de +-knappen for at tilføje en Birth Alarm.




Tryk på 'Tilslut eksisterende gruppe'

3 4

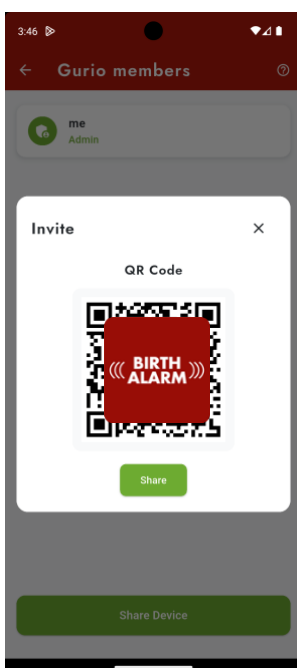

Scan QR-koden, som Birth Alarm-ejeren har givet dig, eller klik på det delte link.

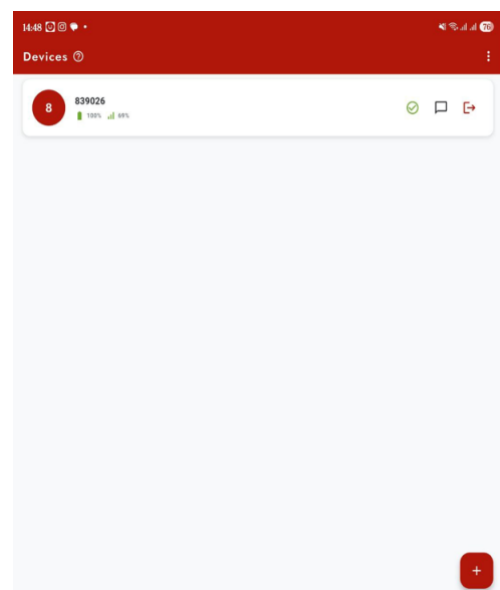

En anden persons Birth Alarm er nu delt med din konto.

Du kan nu se status, batteri og signal i enhedslisten.

6.6 Se logbogen

1 2



Birth Alarm-appen viser dig meddelelshistorikken og giver dig mulighed for at kommunikere med andre brugere om hoppen.

Begynd med at trykke på ikonet "Beskeder" for Birth Alarm-enheden.



Logbogen indeholder hændelser om hoppen i kronologisk rækkefølge.

Det kan f.eks. være meddelelser, batteriadvarsler og mere.

Du kan også selv notere hoppens status ved at skrive en besked.

Logbogen viser meddelelser fra hoppen med tilhørende målinger. Nedenfor forklares, hvad disse værdier betyder:

Batteriniveau

Ud for "Battery" ser du den resterende batteriprocent. Vi anbefaler at udskifte batteriet ved ca. 15 %.

Signalniveau


Signalniveauet angiver modtagelsesstyrken for Birth Alarm Premium Plus App. Dette skal være mindst 15 %. Ved et lavere niveau kan systemet ikke fungere pålideligt. Birth Alarm Premium Plus App vælger automatisk det bedste tilgængelige netværk.

Målt liggevinkel

Ud for "Angle" finder du den målte liggevinkel i grader. Du kan bruge denne værdi til at justere detektionsvinklen, hvis det er nødvendigt.


6.7 Angiv sprog

1 2

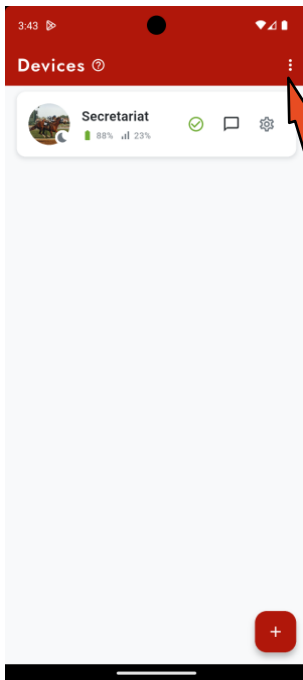


Med Birth Alarm-appen kan du indstille dit eget sprog.

Begynd med at trykke på de tre prikker øverst til højre på skærmen.

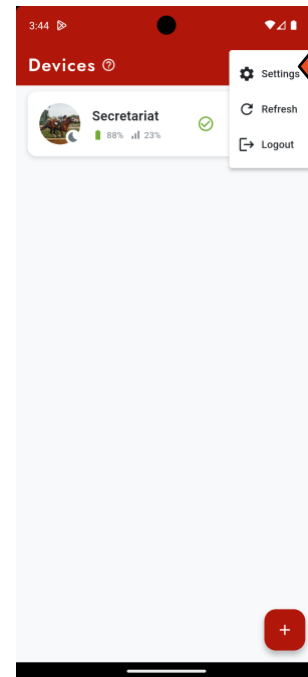

Tryk på 'Indstillinger'.

3 4

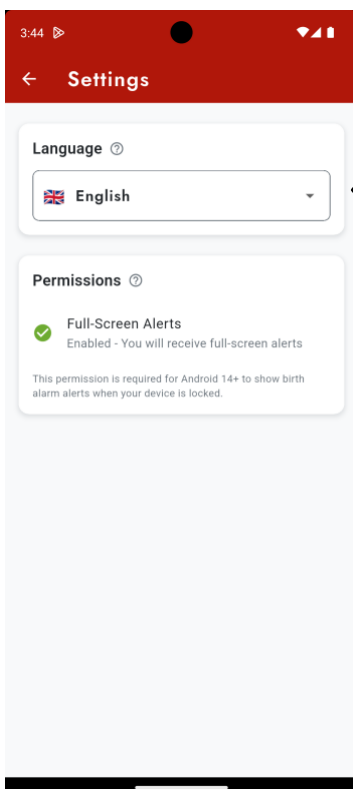

Skift sproget til det ønskede sprog.


6.8 Juster Birth Alarm-indstillinger

1 2



Med Birth Alarm-appen kan du indstille aktivationsvinklen og slå hviletilstanden til eller fra.

Begynd med at trykke på indstillingsknappen for Birth Alarm.

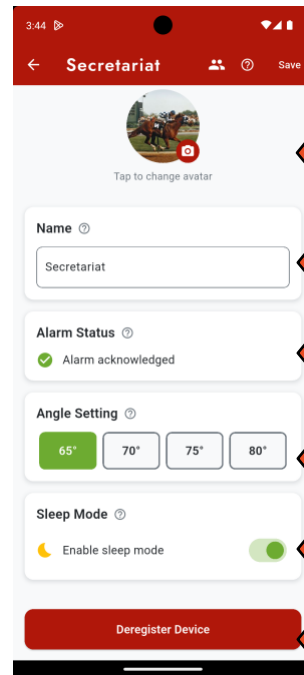

Her kan du:

Angive et foto

Ændre navnet


Bekræfte alarmer

Indstille detektionsvinklen

Slå hviletilstanden til eller fra

Fjerne enheden

3

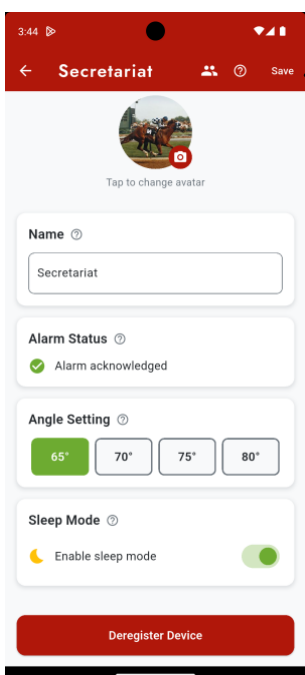

Glem ikke at trykke på 'Gem' efter at have foretaget en ændring.

Hviletilstand

Brug hviletilstanden, når din højdrægtige hoppe hviler eller sover fuldt udstrakt.

I denne tilstand forhindres en meddelelse forårsaget af blot at ligge udstrakt.

Alarmer aktiveres først, når det udstrakte liggen ledsages af uro, som ved veer. Hviletilstanden kan nemt slås til eller fra.

Vinkelindstilling

Birth Alarm Premium Plus App registrerer, når din hoppe lægger sig udstrakt på siden. Dette sker på basis af liggevinklen: som standard betragtes en vinkel på mere end 65° som unormal, hvorefter alarmer aktiveres.


Denne tærskelværdi kan indstilles; en højere værdi gør alarmer mindre følsom og får den til at reagere senere.

Hvis du gentagne gange modtager meddelelser, selvom der ikke er noget galt (f.eks. ved en liggevinkel på 65°), kan du øge detektionsvinklen for denne hoppe, f.eks. til 70°. Indstil helst **ikke dette højere end 75°**.

Bemærk: prøv altid normal tilstand først, inden du aktiverer hviletilstanden. Prøv hviletilstanden først, inden du justerer detektionsvinklen.


6.9 Nulstille adgangskode

1 2

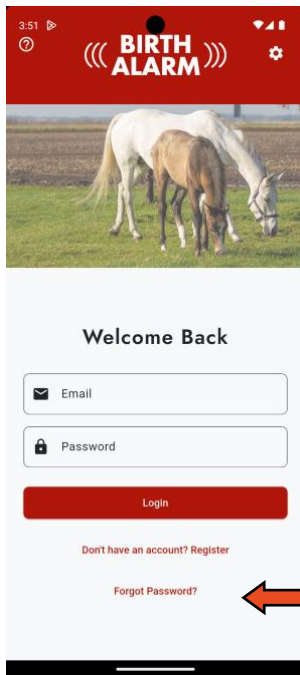

Med Birth Alarm-appen kan du nulstille din adgangskode, hvis du har glemt den.

Tryk på "Glemt adgangskode?" for at begynde.

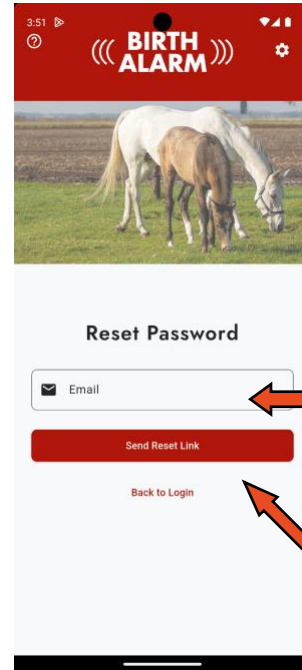


Indtast din e-mailadresse.

Efter at have klikket på "Send nulstillingslink"


Du modtager et link i din indbakke.

3 4

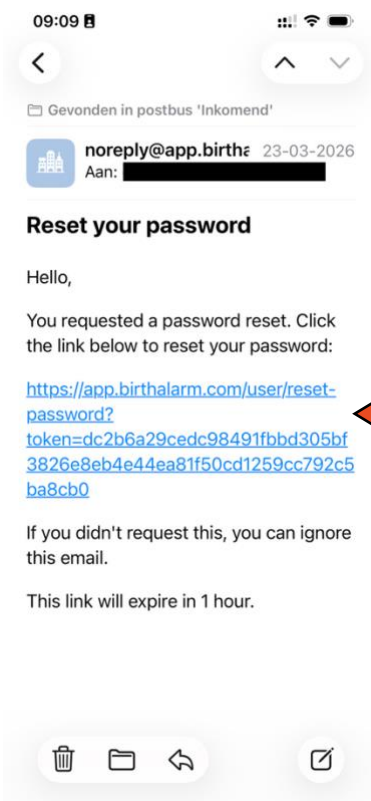

Klik på linket for at starte nulstillingen.

(dette kan også gøres på en anden enhed end den, der har appen)

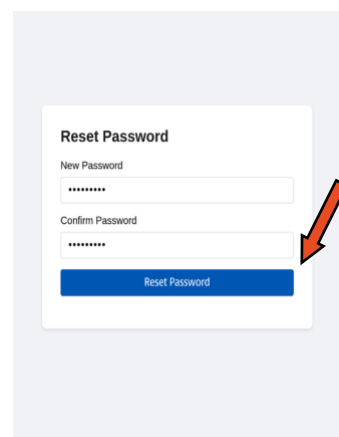

Indtast din nye adgangskode to gange og klik på "Nulstille adgangskode".

Din adgangskode er nu opdateret. Du kan nu logge ind i Birth Alarm-appen med dine nye loginoplysninger.

7. Test

Inden du begynder at bruge Birth Alarm Premium Plus App, er det vigtigt at teste den først for at sikre, at den fungerer korrekt. Du kan nemt udføre testen selv.

- Tag helst Birth Alarm Premium Plus App med til det sted, hvor din hoppe befinder sig.
- Tag Birth Alarm Premium Plus App i hænderne og tænd den, så statuslampen blinker grønt én gang hvert 4. sekund.
- Drej nu Birth Alarm Premium Plus App 90 grader, så en af de smalle sider vender opad. *(Bemærk: Når du bruger hviletilstanden, skal du også lægge Birth Alarm Premium Plus App vandret igen efter 15 sekunder, inden for 3 minutter)*
- Statuslampen begynder nu at blinke orange.
- Efter nogle sekunder bliver statuslampen blå, og der oprettes en forbindelse.
- Inden for kort tid sender Birth Alarm Premium Plus App en meddelelse til din Birth Alarm-app.
- Åbn Birth Alarm-appen og bekræft meddelelsen

Hvis testen er gået godt, kan du fastgøre Birth Alarm Premium Plus App til din hoppe med antirullegjorden eller grimen.

8 Montering på hoppen

For at kunne bruge Birth Alarm Premium Plus App i en gjord eller under grimen skal den fastgøres i den medfølgende holder. Gør følgende:

- Skub forsigtigt Birth Alarm Premium Plus App ind i holderen som vist på nedenstående foto.
- Sørg for, at begge statuslamper er synlige.
- Luk derefter flappen med den medfølgende lukkelås.

i I eksemplet nedenfor er statuslamperne placeret i retning af lukkelåsen, men du må også placere enheden omvendt. Det påvirker ikke funktionen.



8.1 Montering i antirullegjorden

Når du bruger Birth Alarm Premium Plus App i en antirullegjord, skal du montere holderen med Birth Alarm Premium Plus App i henhold til billedet nedenfor. Brug 6 kabelbindere til at fastgøre den i antirullegjorden. Sørg for, at detektoren sidder godt vandret i forhold til hestens ryg.



8.2 Montering under grimen

Hvis du vil bruge Birth Alarm Premium Plus App under grimen, skal du montere den som beskrevet nedenfor med 3 kabelbindere. Sørg for, at grimen sidder let stramt, så enheden hænger lige under hestens kæbe.“



9 Resumé og brugsanvisning

Nedenfor beskrives kort, hvordan Birth Alarm Premium Plus App fungerer, og hvordan den skal bruges. Vi anbefaler, at du læser denne tekst.

Birth Alarm Premium Plus App kontrollerer din hoppes stilling hvert 4. sekund. I mellemtiden skifter Birth Alarm Premium Plus App til en energibesparende tilstand, så batteriet ikke belastes. Når din hoppe får veer og lægger sig udstrakt, vil Birth Alarm Premium Plus App informere dig. Du modtager nu en meddelelse fra Birth Alarm-appen. Åbn appen og stop Birth Alarm Premium Plus App via knappen "Bekræft". Birth Alarm Premium Plus App aktiveres først igen, når hesten igen lægger sig ned efter et stykke tid.

Når du har tilføjet Birth Alarm Premium Plus App til en chatgruppe, vil alle gruppemedlemmer samtidig modtage en meddelelse fra Birth Alarm Premium Plus App, når følingen skal finde sted. Alarmen kan stoppes af et af gruppens medlemmer.

Med et sæt alkalibatterier kan systemet typisk fungere i mindst en måned. Brug af genopladelige batterier eller billigere zink-kul-batterier frarådes kraftigt!

10 Tekniske data

Forsyningsspænding	4,5V (3xAA Alkaline)
Strømforbrug	200µA gennemsnit (1,3A spids)
LTE-modul	LTE FDD B1/B8/B7/B8/B20/B28 WCDMA B1/B8 GSM/EDGE B3/B8
Hviletilstand	Ja
Detektionsvinkel	Justerbar 65..80°
Meddelelsetyper	Birth Alarm App, Opkald, SMS

Garanti: Op til 2 år fra købsdatoen. Gælder ikke ved brud, vandskade og/eller andre skader.

Ansvarsfraskrivelse: Producenten og importøren er ikke ansvarlige for nogen skade, der måtte opstå som følge af brugen af Birth Alarm Premium Plus App.

Levering og arbejde udføres i henhold til de almindelige forretningsbetingelser for Dijkstra-Group B.V.