



Merci pour l'achat de la **Birth Alarm Premium Plus App avec support d'application**. Il s'agit d'un système d'alerte de poulainage extrêmement fiable. Nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel avant utilisation, car une installation et une utilisation correctes sont essentielles pour un bon fonctionnement.

Table des matières

1. Introduction	3
2. Contenu de l’emballage	4
3. Préparation à l’utilisation	5
3.1 Première utilisation	5
3.2 Mise en marche/arrêt	6
4 L’intérieur de la Birth Alarm Premium Plus App	7
4.1 Installer/remplacer les piles	7
4.2 Boîtier de la Birth Alarm Premium Plus App	8
4.3 Carte SIM.....	9
5 Les témoins lumineux (LEDs) de la Birth Alarm Premium Plus App	10
5.1 Les témoins de statut.....	10
5.2 Les témoins LTE	11
6 L’application Birth Alarm	12
6.1 Birth Alarm télécharger l’application	12
6.2 Créer votre compte.....	13
6.3 Enregistrer votre Birth Alarm.....	14
6.4 Invitez quelqu’un à utiliser votre Birth Alarm ensemble	15
6.5 Accepter l’invitation Birth Alarm.....	16
6.6 Consulter le journal.....	17
6.7 Configurer la langue.....	18
6.8 Modifier les paramètres de la Birth Alarm	19
6.9 Réinitialiser le mot de passe	20
7. Test	21
8 Montage sur la jument	22
8.2 Montage dans un surfaix anti-roulement.....	23
8.2 Montage sous le licol	23
9 Résumé et mode d’utilisation	24
10 Caractéristiques techniques	25

1. Introduction

Lorsque votre jument est sur le point de mettre bas, vous souhaitez être présent(e) pour pouvoir intervenir en cas de complications ou appeler un vétérinaire.

Les chevaux et les poneys ont la particularité de s'allonger sur le côté gauche ou droit pendant le poulinage. Cela leur donne plus d'espace pendant les contractions. La Birth Alarm Premium Plus App répond à cette particularité.

En fixant simplement la Birth Alarm Premium Plus App dans un surfaix anti-roulement (ou sous le licol de votre jument), elle vous alertera lorsque le poulinage commence.

2. Contenu de l’emballage

1. **Le détecteur de poulinage Birth Alarm Premium Plus App.**
2. **Le support spécial** (La Birth Alarm Premium Plus App y est glissée.) Ce support peut être fixé soit sous le licol de votre jument, soit dans l’anneau du surfaix anti-roulement.
3. **Le tournevis spécial.** D’un côté, il vous permet d’ouvrir votre Birth Alarm Premium Plus App (par exemple pour remplacer les piles ou insérer/retirer la carte SIM). Le dos de ce tournevis contient également un aimant puissant permettant de commander la Birth Alarm Premium Plus App.
4. **Colliers de serrage.** Pour vous aider à démarrer, nous avons inclus un certain nombre de colliers de serrage (également appelés “serre-câbles”). Ces colliers sont à usage unique, mais sont disponibles dans toutes les quincailleries.
5. **Câble USB.** Ce câble (ou un câble similaire) est nécessaire pour mettre à jour le logiciel.



3. Préparation à l'utilisation

3.1 Première utilisation

Lors de la première utilisation de la Birth Alarm Premium Plus App, vous devez effectuer ces étapes une seule fois :

- Dévissez la Birth Alarm Premium Plus App et retirez l'étiquette qui se trouve contre la borne d'une des piles. Les piles sont maintenant en contact avec la Birth Alarm Premium Plus App.
- Une fois cette opération effectuée, vous pouvez revisser l'appareil et procéder à la configuration. Lors du vissage, veillez à ce que les guides de lumière soient placés au-dessus des témoins de statut (*voir 4.2*)



Dévisser



Retirer l'étiquette



3.2 Mise en marche/arrêt

Vous pouvez mettre en marche/arrêter et commander la Birth Alarm Premium Plus App à l'aide du dos du tournevis spécial fourni. Sur l'un des longs côtés du boîtier, vous trouverez 2 témoins de statut.

Pour mettre la Birth Alarm Premium Plus App **en MARCHÉ**, procédez comme suit :

- Tenez le dos du tournevis spécial contre l'un des témoins de statut. (peu importe lequel des deux)
- La Birth Alarm Premium Plus App va maintenant s'allumer. Vous reconnaîtrez la mise en marche par l'allumage vert, puis bleu plusieurs fois, puis à nouveau vert des deux témoins de statut.
- Après l'allumage des deux témoins de statut, vous pouvez **retirer le tournevis**.
- Votre Birth Alarm Premium Plus App est maintenant allumée. Les témoins de statut s'allumeront brièvement en vert environ toutes les 5 secondes, indiquant que la Birth Alarm Premium Plus App est activée et que son état est normal.



Pour mettre la Birth Alarm Premium Plus App à nouveau **à l'ARRÊT**, procédez comme suit :


- Tenez à nouveau le dos du tournevis spécial contre l'un des témoins de statut. (peu importe lequel des deux)
- Après un court instant, les témoins s'allument en rouge, puis la Birth Alarm Premium Plus App s'éteint d'elle-même.



4 L'intérieur de la Birth Alarm Premium Plus App

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des composants du système dont vous avez besoin pour commander et utiliser le système.

1. Piles
2. Les 2 témoins de statut
3. Porte-carte SIM
4. Connecteur USB
5. LEDs de statut LTE
 - 5.1 "NET" – LED
 - 5.2 "RING" – LED
 - 5.3 "LTE" – LED

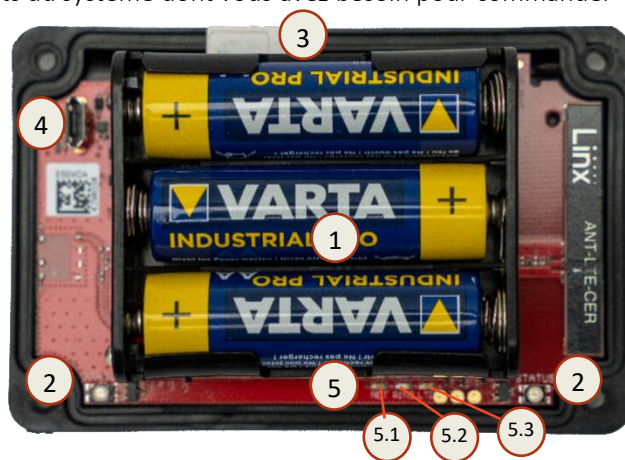

4.1 Installer/remplacer les piles

Lors du remplacement des piles de votre Birth Alarm Premium Plus App, utilisez toujours des piles alcalines (de préférence "Duracell", "Panasonic" ou "Varta"). L'utilisation de piles rechargeables est déconseillée. Remplacez toujours un jeu de piles par 3 à la fois. Si vous ne parvenez pas à retirer les piles avec les doigts, vous pouvez utiliser avec précaution un petit tournevis. Les piles doivent toujours être insérées avec le pôle négatif sur le ressort.



- Utilisez toujours des piles neuves au début de la saison de poulinage !
- Lorsque vous n'utiliserez plus la Birth Alarm Premium Plus App pendant une longue période, comme après la saison de poulinage, retirez les piles pour éviter qu'elles ne coulent et n'endommagent votre Birth Alarm Premium Plus App.


4.2 Boîtier de la Birth Alarm Premium Plus App

Le boîtier de la Birth Alarm Premium Plus App ne peut être revissé que d'une seule façon. Les guides de lumière sur le côté long du couvercle doivent être positionnés au-dessus des témoins de statut lors du vissage.




4.3 Carte SIM

Votre Birth Alarm Premium Plus App fonctionne avec une carte **Nano-SIM**. Les cartes SIM modernes sont livrées dans un cadre détachable dont vous pouvez extraire le format nano-SIM. Attention, le format Nano-SIM est le plus petit format. (12,3 x 8,8 mm).

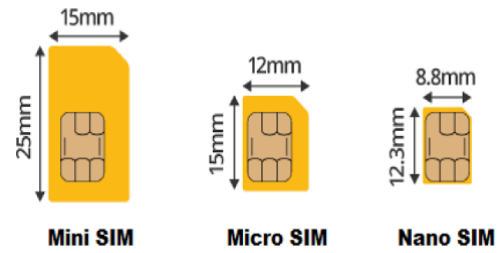

La carte SIM fournie a déjà été installée et testée. Vous n'avez rien d'autre à faire !

Si vous souhaitez utiliser votre propre carte SIM pour quelque raison que ce soit, c'est possible. Votre Birth Alarm Premium Plus App fonctionnera alors comme une Birth Alarm Premium standard sans fonction application. Nous vous recommandons de consulter le manuel de la Birth Alarm Premium à cet effet.

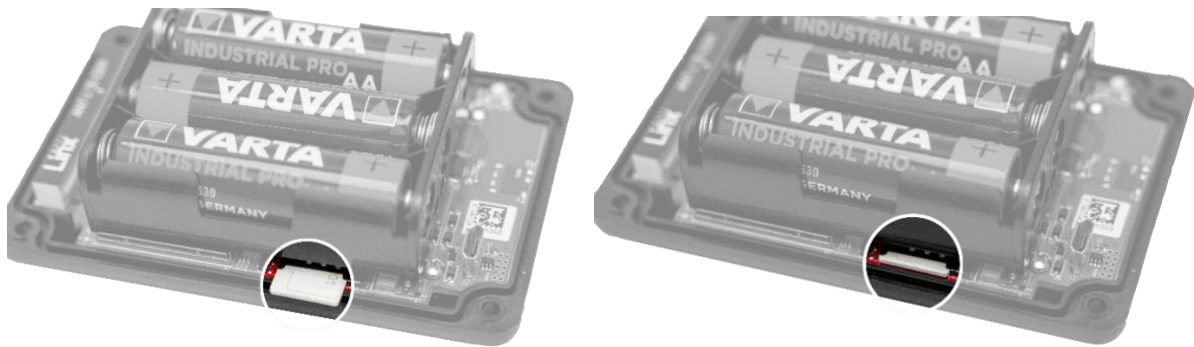

5 Les témoins lumineux (LEDs) de la Birth Alarm Premium Plus App

Pour consulter le statut de votre Birth Alarm Premium Plus App, 2 témoins de statut sont présents à l'extérieur de l'appareil, et 3 petits témoins se trouvent à l'intérieur, relatifs uniquement au module LTE interne.

5.1 Les témoins de statut

Les témoins de statut se trouvent sur le côté long du boîtier. Ces deux témoins se comportent exactement de la même façon. La double conception a pour seul objectif de vous permettre de lire le statut aussi bien du côté gauche que du côté droit de votre jument.



Le tableau ci-dessous présente les motifs de couleur possibles que la Birth Alarm Premium Plus App peut afficher.

Couleur / motif	Signification
● ●	● Veille, pile OK
●● ●●	●● Veille, pile OK, mode sommeil activé
● ●	● Veille, pile faible
● ●	● LTE/GSM actif, connexion en cours
●● ●●	●● LTE/GSM actif, réception réseau insuffisante
●● ●●	●● LTE/GSM actif, réception réseau modérée
●● ●●	●● LTE/GSM actif, réception réseau bonne

5.2 Les témoins LTE

Les témoins LTE ne sont visibles que lorsque vous ouvrez la Birth Alarm Premium Plus App. Normalement, vous n'avez pas besoin de lire ces voyants, cependant cela peut être utile si vous rencontrez des problèmes de connexion mobile et que vous contactez le service client à ce sujet.



Le tableau ci-dessous présente les motifs de clignotement possibles et leur signification :

Nom	Motif	Signification
NET	■ ■ ■	Le module recherche une connexion réseau
NET	■■■ ■■■	Le module est connecté au réseau
NET	■■■■■■■■■■	Le module est en train d'appeler
RING	■	Le module reçoit un appel
LTE	■■■■■■■■■■	Le module est activé

6 L'application Birth Alarm

L'application Birth Alarm vous accompagne pendant la saison de poulinage en surveillant en permanence vos appareils Birth Alarm Premium Plus App et en vous alertant immédiatement au début du poulinage.

En résumé, l'application Birth Alarm offre :

- Aperçu en temps réel du statut, de l'activité, de la pile et de la connexion de vos appareils
- Notifications d'alarme immédiates au début du poulinage (via un appel Internet)
- La possibilité d'ajuster le nom, la photo et les paramètres par appareil
- La vue d'ensemble et la gestion de plusieurs appareils dans une seule application
- Le partage facile de l'accès avec d'autres utilisateurs (p. ex. famille, amis ou équipe d'écurie)

6.1 Télécharger l'application Birth Alarm

Pour recevoir les notifications de votre Birth Alarm Premium Plus App avec support d'application sur votre téléphone, vous devez utiliser notre application "Birth Alarm".


Elle est disponible dans l'**App Store** pour iOS et le **Google Play Store** pour Android.

Vous pouvez également télécharger facilement l'application en scannant le code QR ci-dessous :




6.2 Créer votre compte

1 2

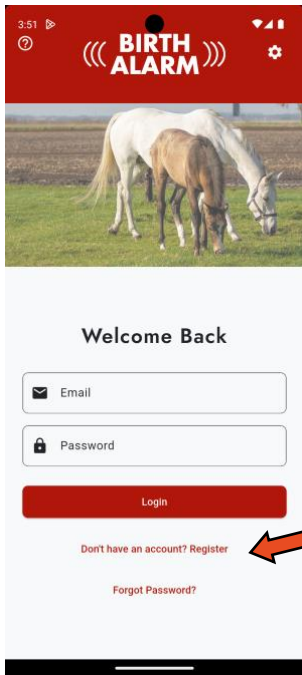


Lorsque vous lancez l'application Birth Alarm, vous voyez cet écran.

Appuyez sur 'Pas encore de compte ? S'inscrire' pour créer un

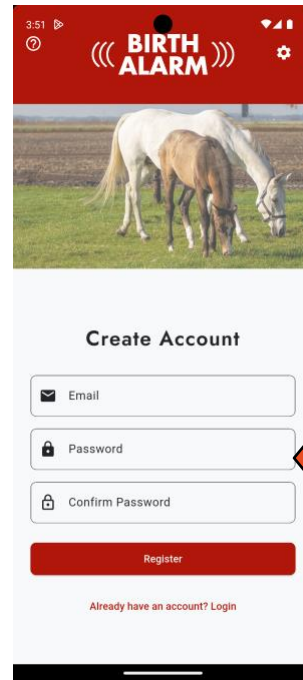

Saisissez votre adresse e-mail et le mot de passe souhaité.

3

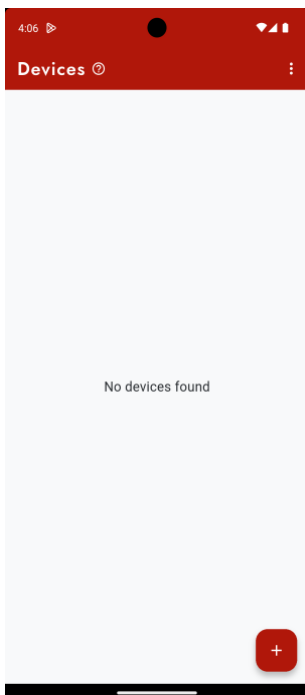


Après l'inscription, vous verrez une liste d'appareils vide.

Vous êtes maintenant prêt(e) à ajouter un nouvel appareil.

6.3 Enregistrer votre Birth Alarm

1 2

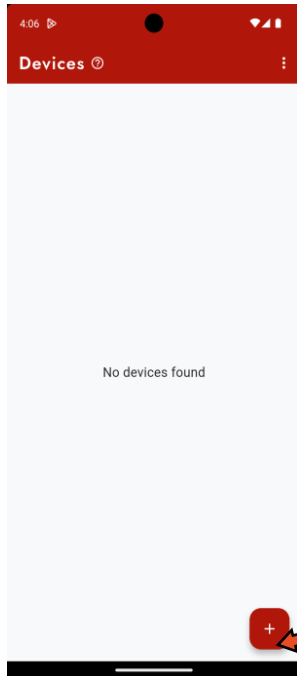


Appuyez sur le bouton + pour enregistrer un nouvel appareil.



Appuyez sur 'Enregistrer un nouvel appareil'.


3 4

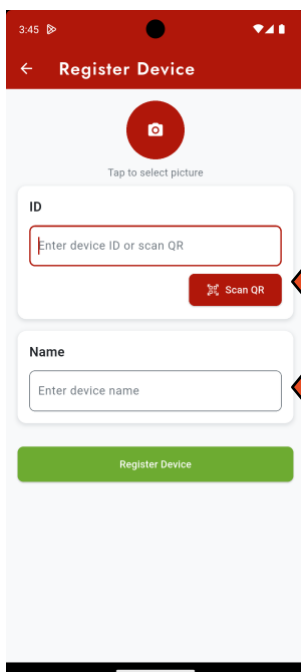

Appuyez sur 'Scanner QR' pour ouvrir votre caméra. Scannez le code QR qui se trouve dans la boîte du produit.

Vous pouvez saisir un nom d'appareil approprié, par exemple le nom de votre jument.

Prêt(e) ? Appuyez ensuite sur 'Enregistrer l'appareil'.

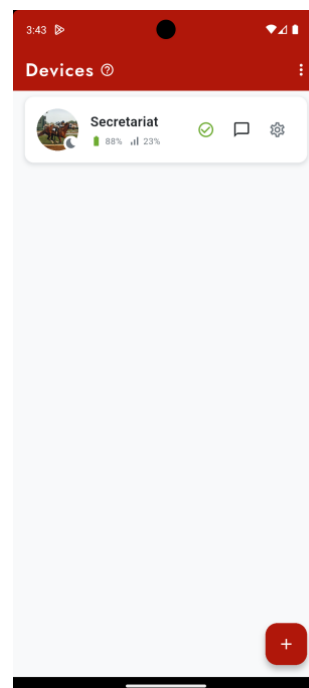


La Birth Alarm de votre jument est maintenant liée à votre compte.

Vous pouvez maintenant consulter le statut, la pile et le signal dans la liste des appareils.

6.4 Invitez quelqu'un à utiliser votre Birth Alarm ensemble


Donnez à un autre utilisateur l'accès aux notifications de votre Birth Alarm, afin de recevoir ensemble les notifications et de surveiller le poulinage.

1 2

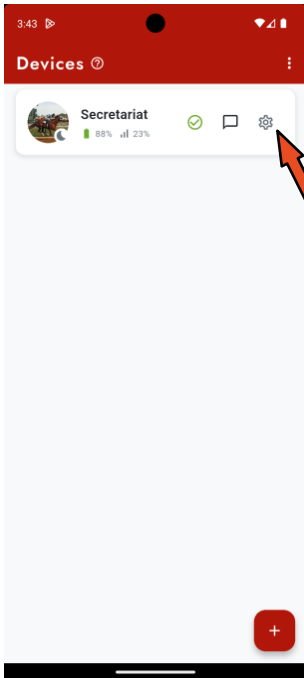


Avec l'application Birth Alarm, vous pouvez partager votre Birth Alarm avec un autre utilisateur.

Pour commencer, appuyez sur le bouton de paramètres de la Birth Alarm que vous souhaitez partager.

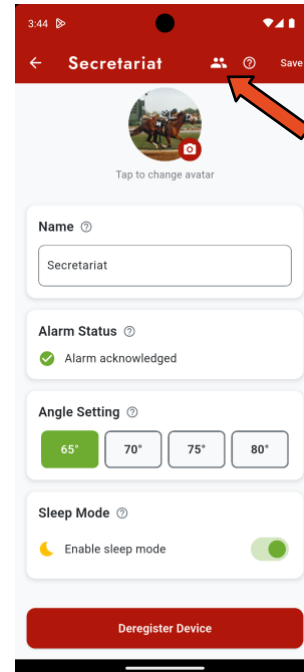

Appuyez sur l'icône 'Utilisateurs'


3 4

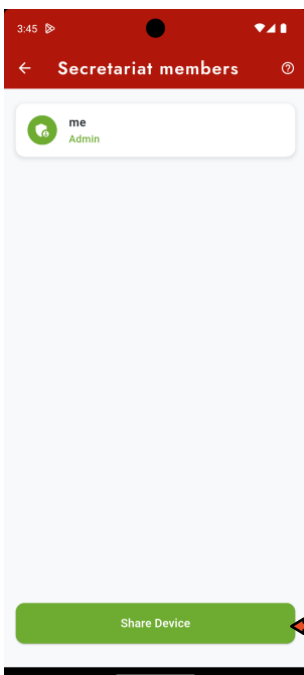

Vous verrez une liste de membres.

Appuyez sur 'Partager l'appareil' pour montrer le code QR à quelqu'un d'autre ou lui envoyer un lien.

Celui-ci est nécessaire pour ajouter l'appareil.

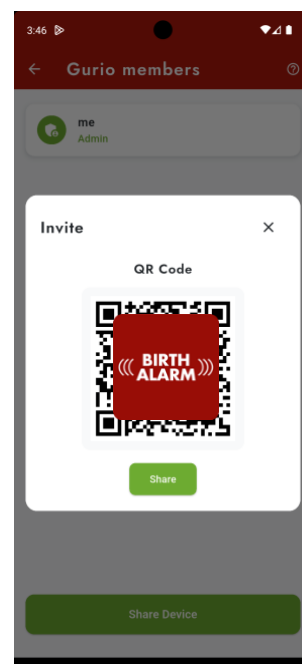


Laissez la personne invitée scanner le code QR dans l'application Birth Alarm (voir étape 6.5) ou suivre le lien partagé.

L'appareil apparaîtra alors dans leur application Birth Alarm.

6.5 Accepter l'invitation Birth Alarm

Acceptez l'invitation de l'administrateur pour recevoir des notifications d'une Birth Alarm.

1 2

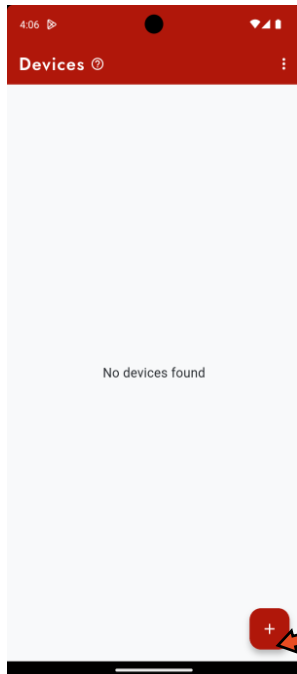


Avec l'application Birth Alarm, vous pouvez ajouter des Birth Alarms d'autres utilisateurs.

Appuyez sur de + pour ajouter une Birth Alarm.




Appuyez sur 'Rejoindre un groupe existant'

3 4

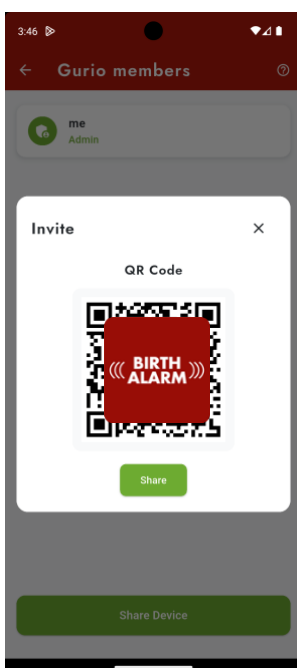

Scannez le code QR fourni par le propriétaire de la Birth Alarm ou cliquez sur le lien partagé.

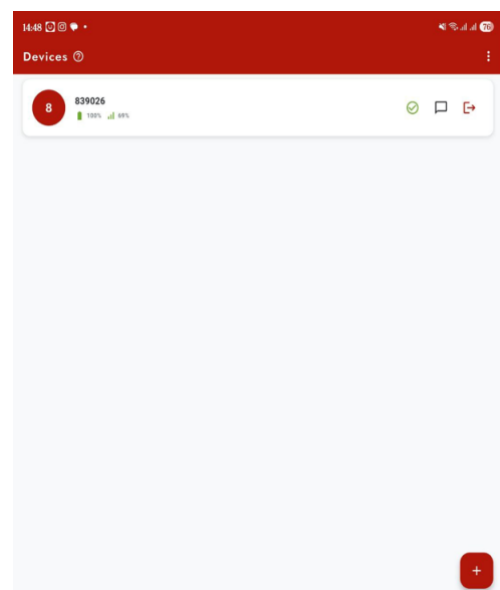

La Birth Alarm d'une autre personne a maintenant été partagée avec votre compte. Vous pouvez maintenant consulter le statut, la pile et le signal dans la liste des appareils.

6.6 Consulter le journal



L'application Birth Alarm vous permet de consulter l'historique des notifications et de communiquer avec d'autres utilisateurs au sujet de la jument.

Pour commencer, appuyez sur l'icône "Messages" de l'appareil Birth Alarm.

1 2



Le journal contient les événements concernant la jument dans l'ordre chronologique.

Il s'agit par exemple de notifications, d'avertissements de pile et bien plus encore.

Vous pouvez également noter vous-même le statut de la jument en tapant un message.

Le journal affiche les notifications de la jument avec les valeurs de mesure associées. Vous trouverez ci-dessous la signification de ces valeurs :

Niveau de pile

À côté de "Battery", vous voyez le pourcentage de pile restant. Nous recommandons de remplacer la pile à environ 15 %.

Niveau de signal


Le niveau de signal indique la puissance de réception de la Birth Alarm Premium Plus App. Celui-ci doit être d'au moins 15 %. En dessous de ce niveau, le système ne peut pas fonctionner de manière fiable. La Birth Alarm Premium Plus App sélectionne automatiquement le meilleur réseau disponible.

Angle de position mesuré

À côté de "Angle" figure l'angle de position mesuré en degrés. Vous pouvez utiliser cette valeur pour ajuster l'angle de détection si nécessaire.


6.7 Configurer la langue

1 2

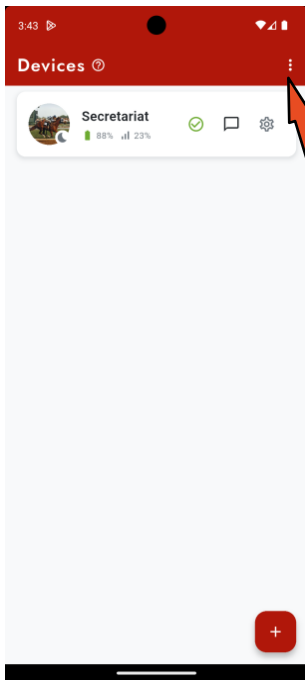


Avec l'application Birth Alarm, vous pouvez définir votre propre langue.

Pour commencer, appuyez sur les trois points en haut à droite de l'écran.

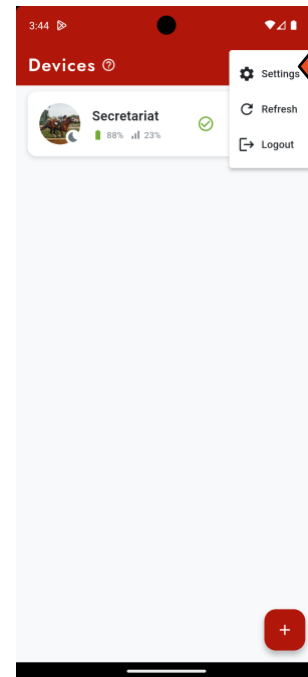

Appuyez sur 'Paramètres'.

3 4

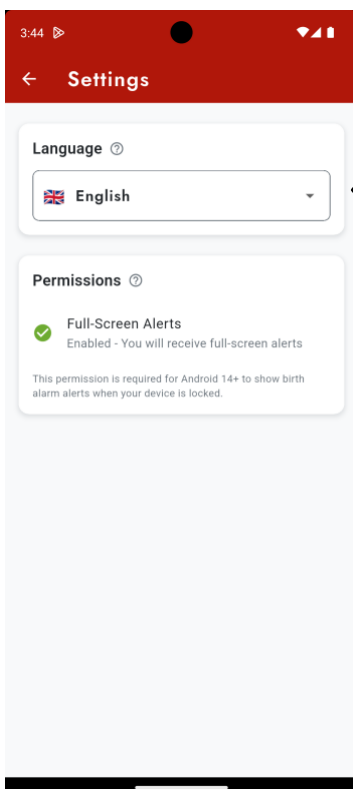

Changez la langue vers la langue souhaitée.


6.8 Modifier les paramètres de la Birth Alarm

1 2



Avec l'application Birth Alarm, vous pouvez régler l'angle d'activation et activer ou désactiver le mode sommeil.

Pour commencer, appuyez sur le bouton de paramètres de la Birth Alarm.

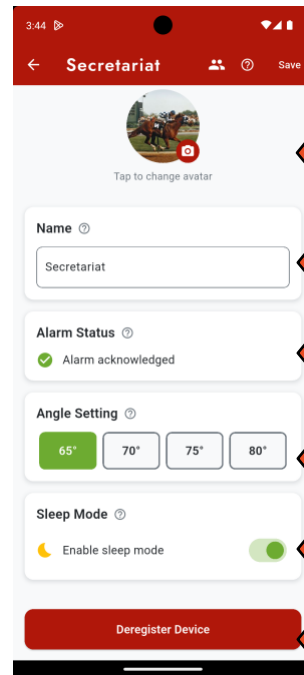

Ici, vous pouvez :

Définir une photo

Modifier le nom


Confirmer l'alarme

Régler l'angle de détection

Activer ou désactiver le mode sommeil

Supprimer l'appareil

3

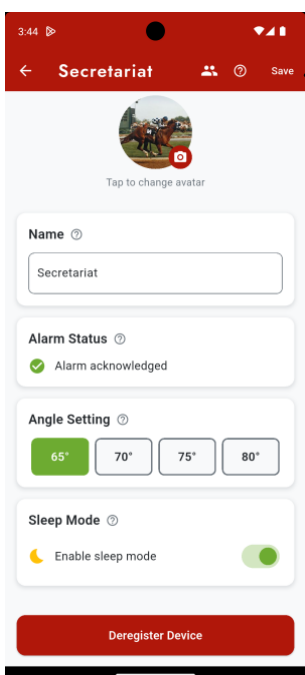

N'oubliez pas d'appuyer sur 'Enregistrer' après avoir effectué une modification.

Mode sommeil

Utilisez le mode sommeil lorsque votre jument très gestante se repose ou dort complètement allongée.

Dans ce mode, une notification causée par le simple fait de s'allonger est évitée.

L'alarme n'est activée que lorsque la position allongée s'accompagne d'agitation, comme lors des contractions. Le mode sommeil peut être facilement activé ou désactivé.

Réglage de l'angle

La Birth Alarm Premium Plus App détecte lorsque votre jument s'allonge sur le côté. Cela se fait sur la base de l'angle de position : par défaut, un angle supérieur à 65° est considéré comme anormal, après quoi l'alarme est activée.

Cette valeur seuil est réglable ; une valeur plus élevée rend l'alarme moins sensible et lui fait réagir plus tard.


Si vous recevez répétitivement des notifications alors que tout va bien (par exemple à un angle de position de 65°), vous pouvez augmenter l'angle de détection pour cette jument, par exemple à 70°.

De préférence, ne **réglez pas ceci au-delà de 75°**.

Remarque : essayez toujours d'abord le mode normal avant d'activer le mode sommeil. Essayez d'abord le mode sommeil avant d'ajuster l'angle de détection.


6.9 Réinitialiser le mot de passe

1 2

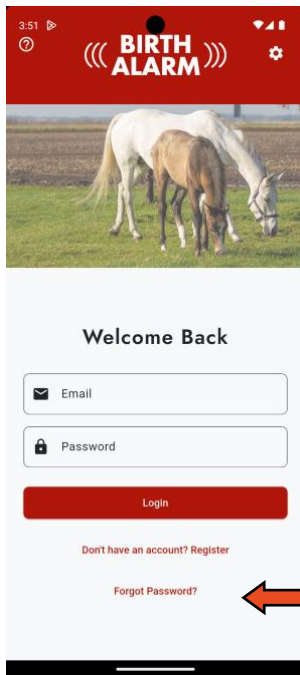

Avec l'application Birth Alarm, vous pouvez réinitialiser votre mot de passe si vous l'avez oublié.


Appuyez sur "Mot de passe oublié ?" pour commencer.

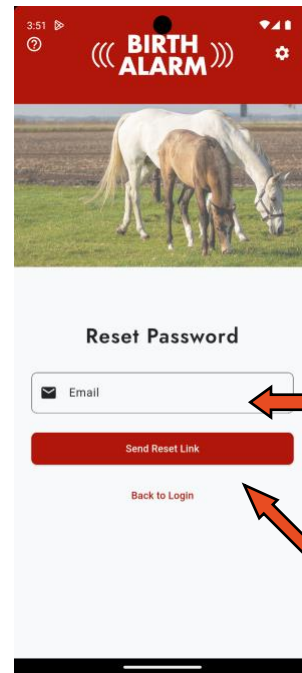

Saisissez votre adresse e-mail.


Après avoir cliqué sur "Envoyer le lien de réinitialisation"

3 4

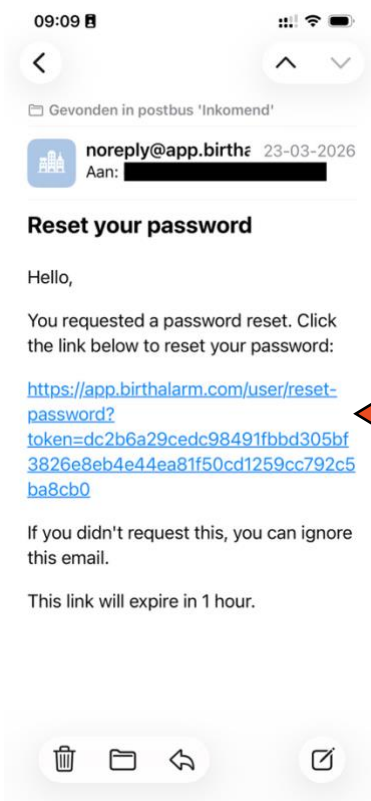

Cliquez sur le lien pour démarrer la réinitialisation.

(cela peut également se faire sur un autre appareil que celui sur lequel vous

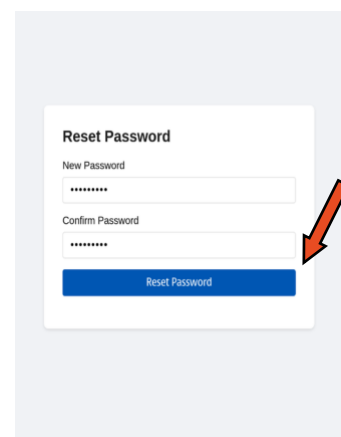

Saisissez deux fois votre nouveau mot de passe et cliquez sur "Réinitialiser le mot de passe".

Votre mot de passe a maintenant été mis à jour. Vous pouvez maintenant vous connecter à l'application Birth Alarm avec vos nouveaux identifiants.

7. Test

Avant d'utiliser la Birth Alarm Premium Plus App, il est important de la tester d'abord pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement. Vous pouvez facilement le faire vous-même.

- Emmenez de préférence la Birth Alarm Premium Plus App à l'endroit où se trouve votre jument.
- Prenez la Birth Alarm Premium Plus App en main et mettez-la en marche de sorte que le témoin de statut clignote en vert une fois toutes les 4 secondes.
- Faites maintenant pivoter la Birth Alarm Premium Plus App de 90 degrés de sorte que l'un des petits côtés soit dirigé vers le haut. (*Remarque : En mode sommeil, vous devez également remettre la Birth Alarm Premium Plus App en position horizontale après 15 secondes, dans un délai de 3 minutes*)
- Le témoin de statut va maintenant commencer à clignoter en orange.
- Après quelques secondes, le témoin de statut devient bleu et une connexion est établie.
- Dans un court laps de temps, la Birth Alarm Premium Plus App enverra une notification à votre application Birth Alarm.
- Ouvrez l'application Birth Alarm et confirmez la notification

Si le test s'est bien déroulé, vous pouvez fixer la Birth Alarm Premium Plus App à votre jument à l'aide du surfaix anti-roulement ou du licol.

8 Montage sur la jument

Pour utiliser la Birth Alarm Premium Plus App dans une sangle ou sous le licol, elle doit être fixée dans le support fourni, comme suit:

- Faites glisser délicatement la Birth Alarm Premium Plus App dans le support comme illustré sur la photo ci-dessous.
- Assurez-vous que les deux témoins de statut sont visibles.
- Fermez ensuite le volet avec le clip de fermeture fourni.

i Dans l'exemple ci-dessous, les témoins de statut sont positionnés vers le clip de fermeture, mais vous pouvez également placer le boîtier dans l'autre sens. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement.



8.2 Montage dans un surfaix anti-roulement

Lorsque vous utilisez la Birth Alarm Premium Plus App dans un surfaix anti-roulement, montez le support avec la Birth Alarm Premium Plus App comme indiqué sur l'image ci-dessous. Utilisez 6 colliers de serrage pour le fixer dans le surfaix anti-roulement. Assurez-vous que le détecteur soit bien horizontal par rapport au dos de la jument.



8.2 Montage sous le licol

Si vous souhaitez utiliser la Birth Alarm Premium Plus App sous un licol, montez-la comme prescrit ci-dessous à l'aide de 3 colliers de serrage. Assurez-vous que le licol soit suffisamment serré pour que la Birth Alarm Premium Plus App pende directement sous la mâchoire de la jument.



9 Résumé et mode d'utilisation

Vous trouverez ci-dessous une brève description du fonctionnement de la Birth Alarm Premium Plus App et de son mode d'utilisation. Nous vous recommandons de lire ce texte.

La Birth Alarm Premium Plus App vérifie la posture de votre jument toutes les 4 secondes. Entre les vérifications, la Birth Alarm Premium Plus App passe en mode économie d'énergie afin de ne pas solliciter la pile. Lorsque votre jument a des contractions et s'allonge, la Birth Alarm Premium Plus App vous alertera. Vous recevrez une notification de l'application Birth Alarm. Ouvrez l'application et arrêtez la Birth Alarm Premium Plus App via le bouton "Confirmer". La Birth Alarm Premium Plus App ne redevient active que lorsque le cheval se recouche après un certain temps.

Lorsque vous avez ajouté la Birth Alarm Premium Plus App à un groupe de discussion, tous les membres du groupe recevront simultanément une notification de la Birth Alarm Premium Plus App lorsque le poulinage est imminent. L'alarme peut être arrêtée par l'un des membres du groupe.

Avec un jeu de piles alcalines, le système peut généralement fonctionner pendant au moins un mois. L'utilisation de piles rechargeables ou de piles zinc-carbone moins chères est fortement déconseillée !

10 Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	4,5V (3xAA Alkaline)
Consommation de courant	200µA moyen (1,3A crête)
Module LTE	LTE FDD B1/B8/B7/B8/B20/B28 WCDMA B1/B8 GSM/EDGE B3/B8
Mode sommeil	Oui
Angle de détection	Réglable 65..80°
Types de notification	Application Birth Alarm, Appel, SMS

Garantie : Jusqu'à 2 ans à compter de la date d'achat. Ne s'applique pas en cas de casse, de dégâts des eaux et/ou d'autres dommages.

Avertissement: Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité pour tout dommage résultant de l'utilisation de la Birth Alarm Premium Plus App.

La livraison et les prestations sont effectuées conformément aux conditions générales de Dijkstra-Group B.V.